



KOD KATALOGOWY	AM-D-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-02
CODE	AM-D-02
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-02

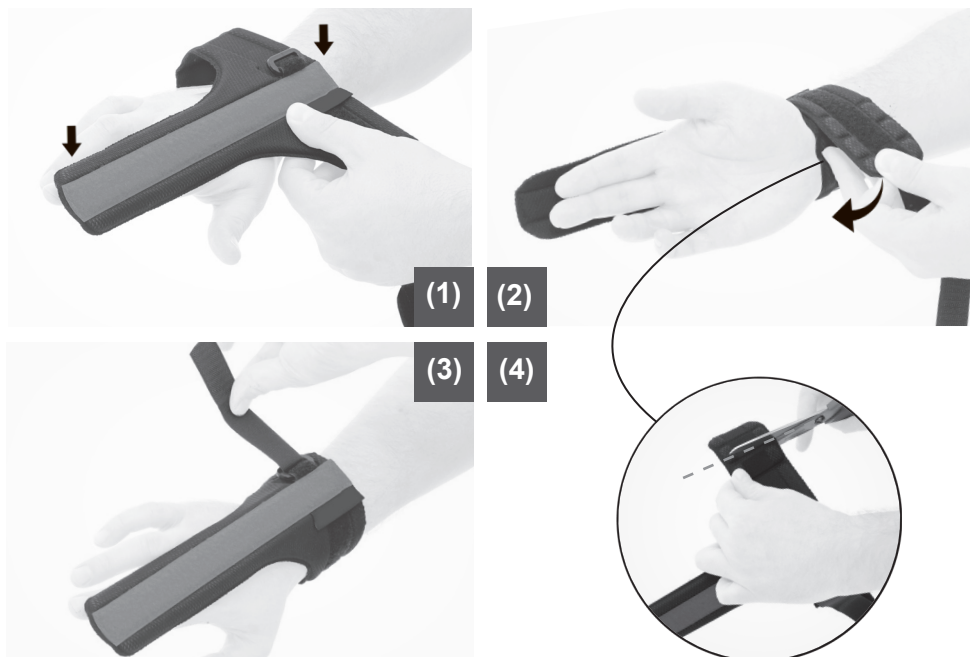

1. PL: Załóż ortezę na palec (1), opleć pasek według wskazanego kierunku (2), przepleć taśmę przez klamrę i zapnij na rzep (3). Jeśli jest potrzeba, odetnij jego zbędną długość (4).

EN: Place the brace on the fingers (1), wrap the strap in the indicated direction (2), interlace the strap through the buckle and fasten the Velcro (3). If necessary, cut the needless part of the strap off (4).

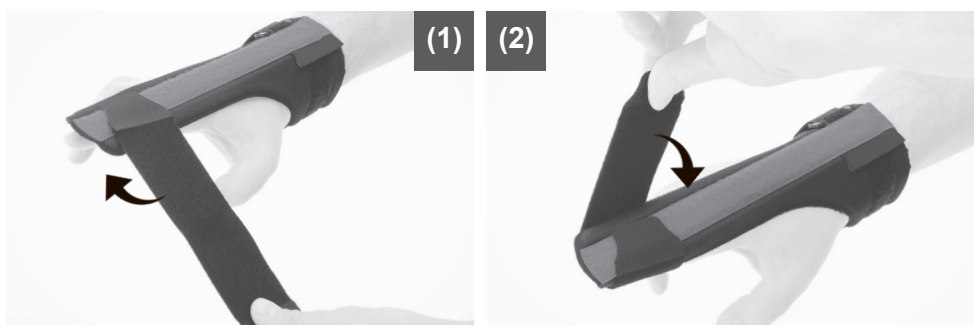


2. PL: Przypnij taśmę do ortozy (1), opleć palec we wskazanym kierunku i zapnij rzep (2).

EN: Attach the strap to the brace (1), wrap the finger in the indicated direction and fasten the Velcro (2).



(1)

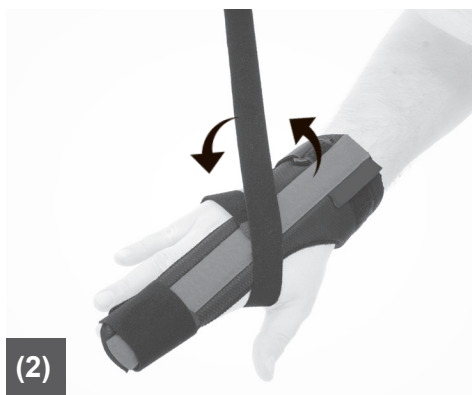

(2)



(3)

3. PL: Przytnij taśmę w okolicy śródreźcza (1), opleć we wskazanym kierunku (2) i zapnij rzep (3).

EN: Attach the strap in the metacarpal area (1), wrap in the indicated direction (2) and fasten the Velcro (3).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.



PL: UWAGA! W sposób opisany powyżej można usztywnić palce II-V.

EN: WARNING! You can use the brace in this way to stiffen fingers II-V.