



INSTRUKCJA MONTAŻU AKCESORIÓW FLEXPOINT®  
ZEBRA INVENTO, DALMATYŃCZYK INVENTO





System **FlexPoint**<sup>®</sup> składa się z wielu elementów, pozwalających na poprawną i bezpieczną stabilizację tułowia, miednicy oraz kończyn dolnych. Dzięki uniwersalnym sposobom mocowania, doskonale sprawdza się w zdecydowanej większości wózków i fotelików oferowanych na rynku wyrobów medycznych. Wybrane produkty systemu **FlexPoint**<sup>®</sup> posiadają dodatkowe elementy pozwalające na łatwiejsze zapięcie pasów osobom z dysfunkcjami dłoni.

W zależności od indywidualnych potrzeb, użytkownik może wybrać rozwiązanie klasyczne lub zaawansowany produkt dynamiczny.

**FlexPoint**<sup>®</sup> jest systemem rekomendowanym szczególnie dla osób ze spastycznością. Dynamiczna konstrukcja wyrobów oparta jest na miękkich, sprężystych i rozciągliwych elementach odciażających. Gwarantuje to najwyższy komfort użytkowania. Jednocześnie znacznie redukuje ryzyko uszkodzenia ciała m.in. poprzez nadmierny ucisk ze strony np. pasów nieelastycznych.

Poprawna pozycja siedząca wspomagana systemem **FlexPoint**<sup>®</sup> to bezpieczeństwo i komfort w czasie pracy, terapii i zabawy przez cały dzień.

## Dlaczego FlexPoint<sup>®</sup>?



### Uniwersalność

Poszczególne elementy mogą być z powodzeniem stosowane w wózkach inwalidzkich i innych siedziskach używanych przez użytkowników.



### Dynamika pionowa

Sprężysty materiał efektywniej rozkłada nacisk niż standardowe rozwiązania stabilizacji użytkownika.



### Dynamika pozioma

Wyroby z tą funkcją są dedykowane dla osób ze zwiększonym napięciem mięśniowym. Znacznie redukują ilość i siłę napadów spastyki oraz podnoszą komfort użytkowania.



### System Chwyc i Pociągnij<sup>™</sup>

Specjalny system stosowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych. Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D ułatwia użytkownikowi szybkie i wygodne dopasowanie wyrobu. System przeznaczony jest także dla osób z dysfunkcjami dłoni.



### Przyjazdy dla skóry

Zastosowane materiały nie wywołują podrażnień i są bezpieczne dla użytkownika.



**Przed montażem wyrobu FlexPoint<sup>®</sup> należy zapoznać się z instrukcją obsługi „System Dynamicznej Stabilizacji Pacjenta FlexPoint<sup>®</sup>”!**



**FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA**

FP-01/WZ KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM  
FP-01/WB KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA  
FP-01/SZ KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM  
FP-01/SB KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA



**FP-02 DYNAMICZNA KAMIZELKA 4-PUNKTOWA TYPU H**



**FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**



**FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE PASY TUŁOWIA**



**MIEJSCA MONTAŻOWE:**





## MONTAŻ GÓRNYCH PASÓW KAMIZELEK:

- i** Odpiąć klamry znajdujące się na górnych pasach kamizelki, zdemontować trójkąty pozostawiając regulatory.

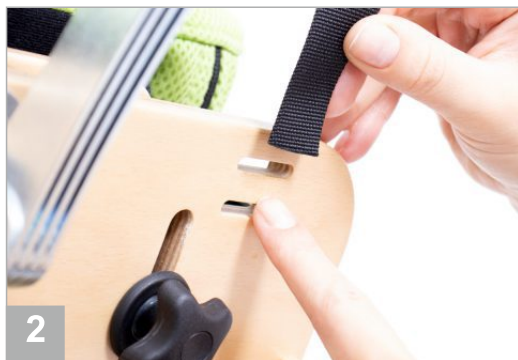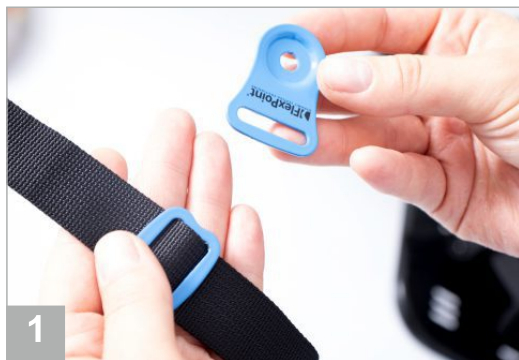

- i** Do montażu pasów górnych kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **A**, wskazane na str. 4 instrukcji.





## MONTAŻ DOLNYCH PASÓW KAMIZELEK:


**i** Do montażu dolnych pasów kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **B**, wskazane na str. 4 instrukcji.

Przed przystąpieniem do montażu pasów należy uprzednio zdjąć trójkąty montażowe znajdujące się na ich końcach pozostawiając regulatory.





**FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY  
I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ**

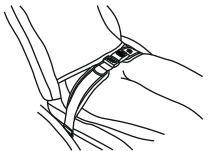

**FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY**



**FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY**





**FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA**

## MIEJSCA MONTAŻOWE:




Miejsce do montażu pasów znajduje się na  
dolnej płycie siedziska.

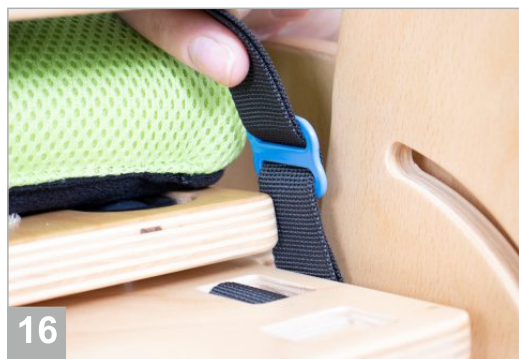

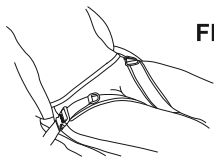

## FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA


### POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:

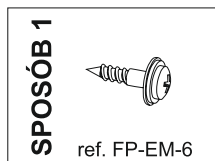

i

#### MONTAŻ PASÓW TYLNYCH

Przed montażem pasów odwodzących uda należy zdemonstrować trójkąt montażowy. Przy montażu pasów tylnych należy postępować zgodnie z instrukcją montażu pasów stabilizacji miednicy (patrz pkt. Miejsca montażowe, str. 7).

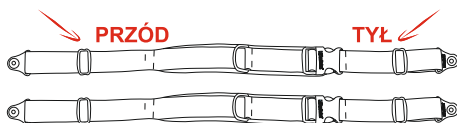

i

#### MONTAŻ PASÓW PRZEDNICH


Do montażu pasów przednich zaleca się ułożyć fotelik tak, aby uzyskać łatwy dostęp do dolnej powierzchni siedziska.

Sugerowane miejsce wykonania otworu do przytwierdzenia trójkąta montażowego należy wykonać 2,5 cm od bocznej krawędzi płyty siedziska oraz 2,5 cm od krawędzi przedniej.


Czynność powtórzyć po drugiej stronie siedziska.




17

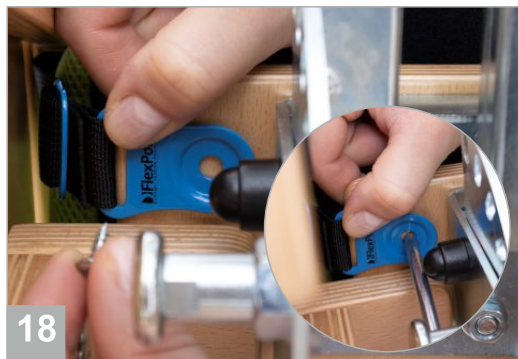

18

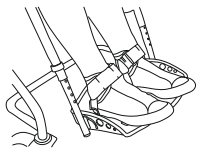


## FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK

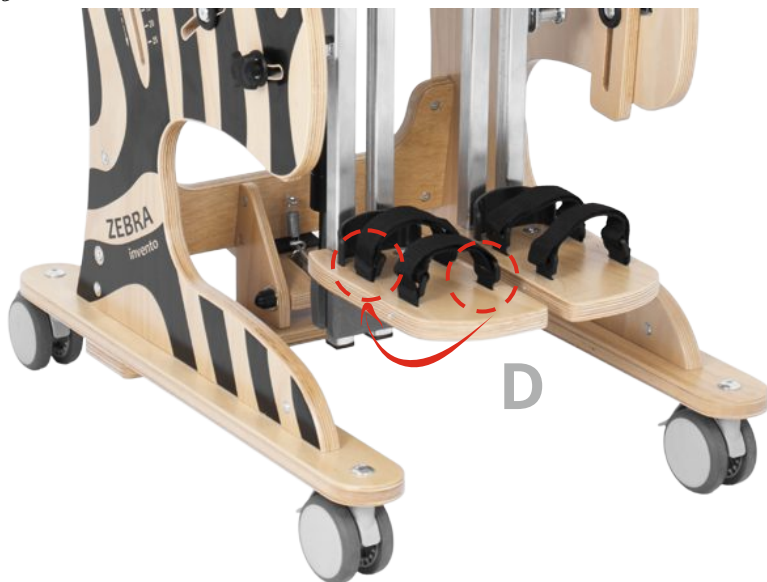



Do montażu dynamicznych stabilizatorów kostek należy wykorzystać miejsce montażowe oznaczone symbolem **D**.



19

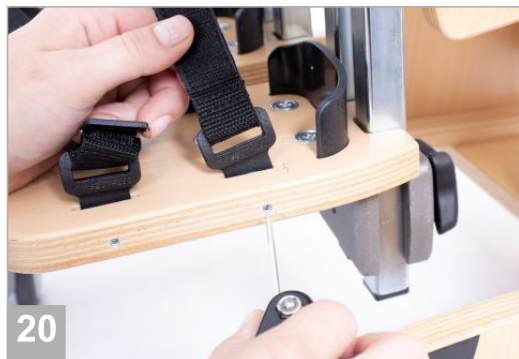

20

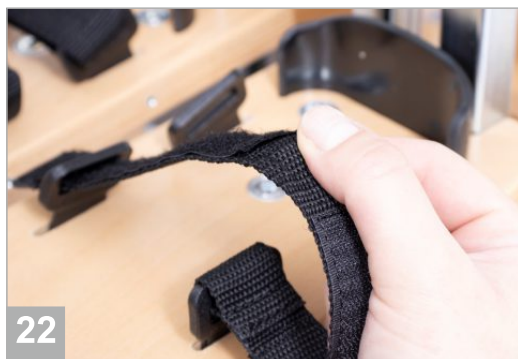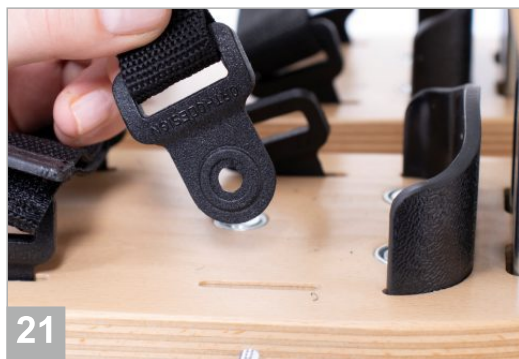



**i** Należy zabezpieczyć odkręcone śruby wkręcając je w płytę stopki (**zdj. 27**) w określonych miejscach tak, aby nie wystawały i nie stwarzały dodatkowego zagrożenia zahaczenia czy poślizgnięcia.











flex-point.pl