


FOTELIK REHABILITACYJNY

ZEBRA™

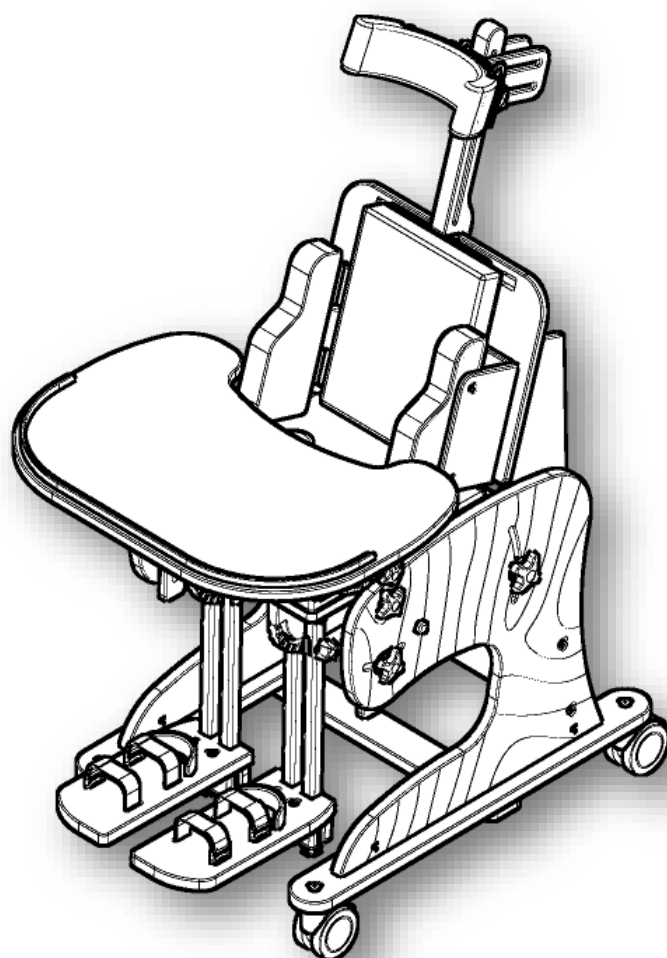

CE

INSTRUKCJA MONTAŻU

AKCES[®]MED



UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy Akces-MED sp. z o.o. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

**Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych.**

Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.

Oznaczenie producenta w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych:


PL/CA01 04088/W




Firma Akces-Med Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

Lista części:


a) Siedzisko

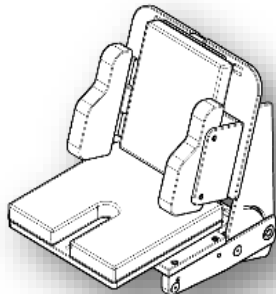


e) Ramka z kołami

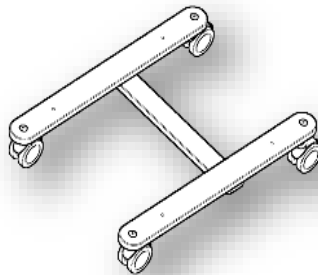


i) Stolik

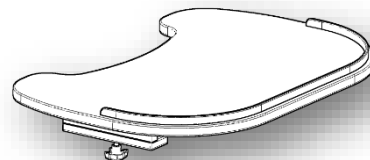


b) Bok lewy

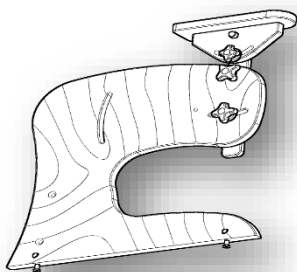


f) Podnózek (2szt.)

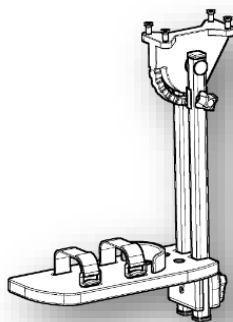


j) Zagłówek

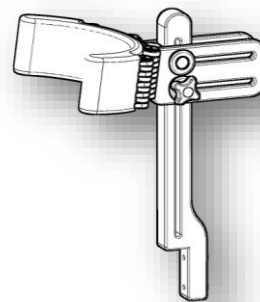


c) Bok prawy

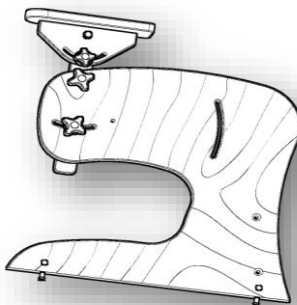

g) Klin

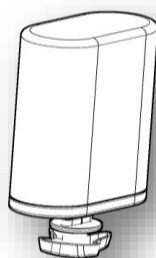


k) Śruba z łbem stożkowym M6x45

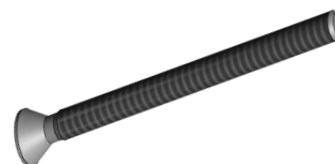


d) Żeberko




h) Peloty boczne

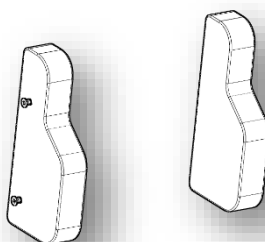

l) Podkładka miseczkowa.

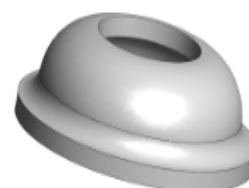

m) Nakrętka wałeczkowa

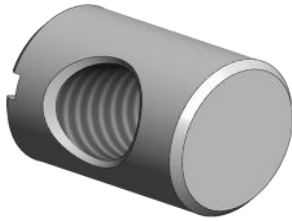

q) Tulejka



u) Śruba z łbem stożkowym
M6x25




n) Pokrętło z nakrętką




r) Wkręt metryczny




v) Śruba z łbem stożkowym
M6x20

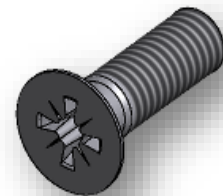

o) Podkładka stalowa

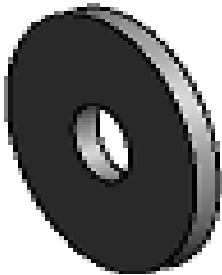

s) Podkładka z tworzywa

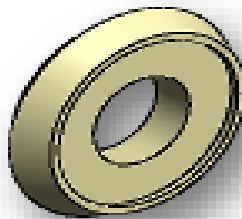


w) Pokrętło ze śrubą




p) Podkładka wpustowa



t) Nakrętka Erisona

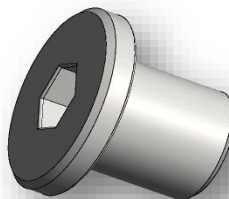


x) Podkładka z tworzywa


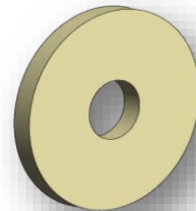


Etap I – Składanie stelaża Zebry


1. Odnaleźć siedzisko zebry.

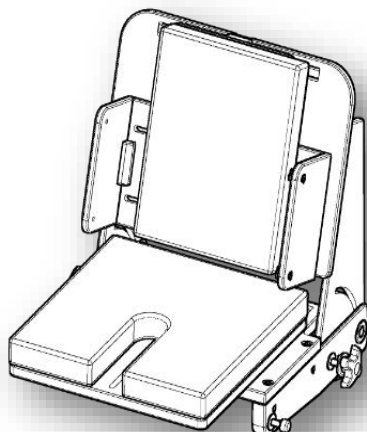


2. Wykręcić zestawy mocujące z lewej strony siedziska.

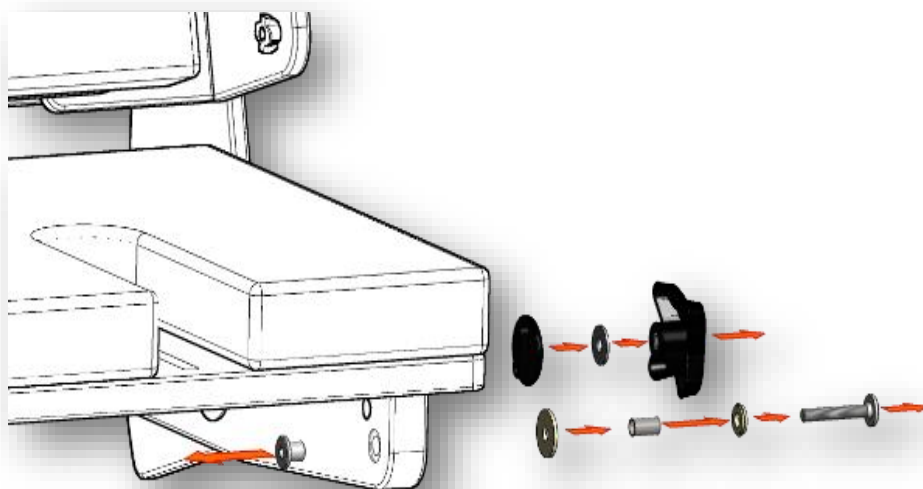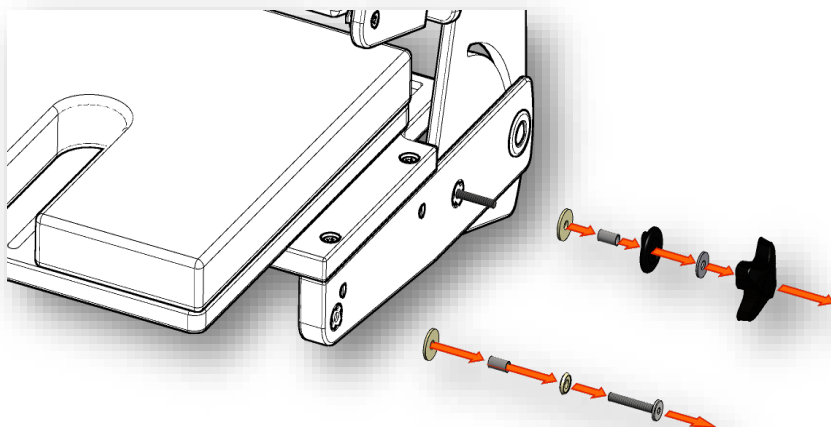


3. Przykręcić lewy bok Zebry do siedziska przy pomocy wykręconych w pkt.2 elementów łącznych. Zachować kolejność jak na rysunku.

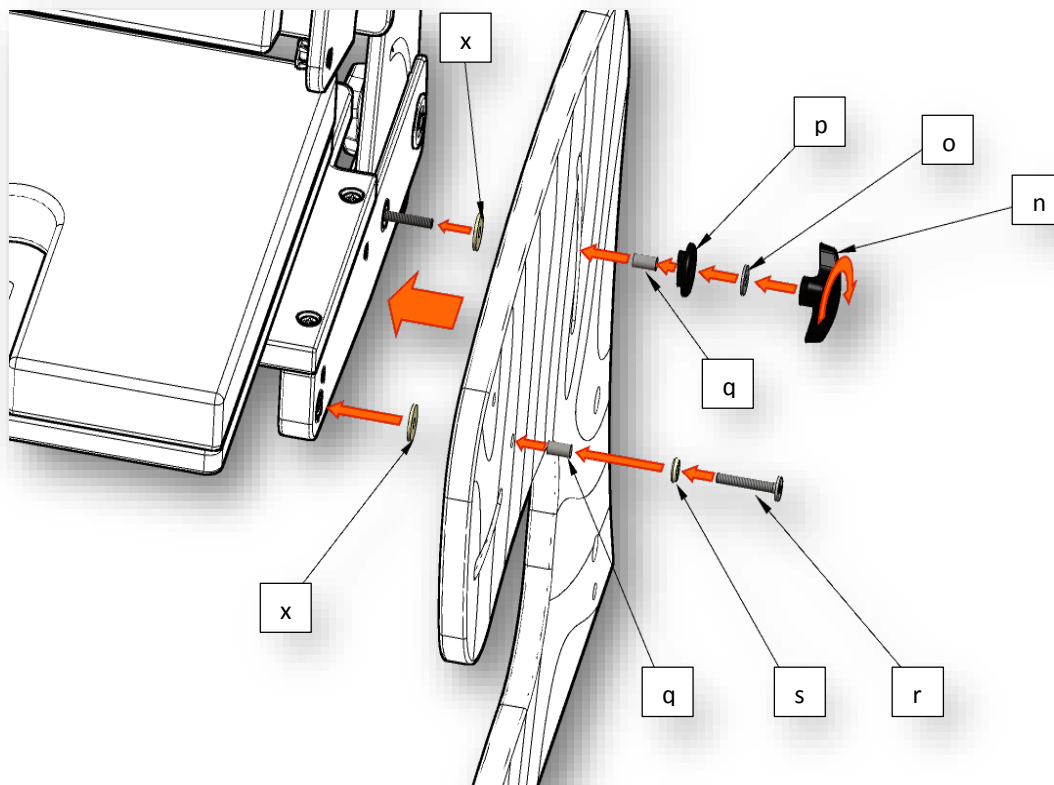


4. Dokręcić wkręt (r) przy pomocy nakrętki Eriksona (t) z zachowaniem luzu (swobodny obrót podkładki (s)).
UWAGA: Na nakrętki Eriksona wcisnąć klej do klejenia śrub.

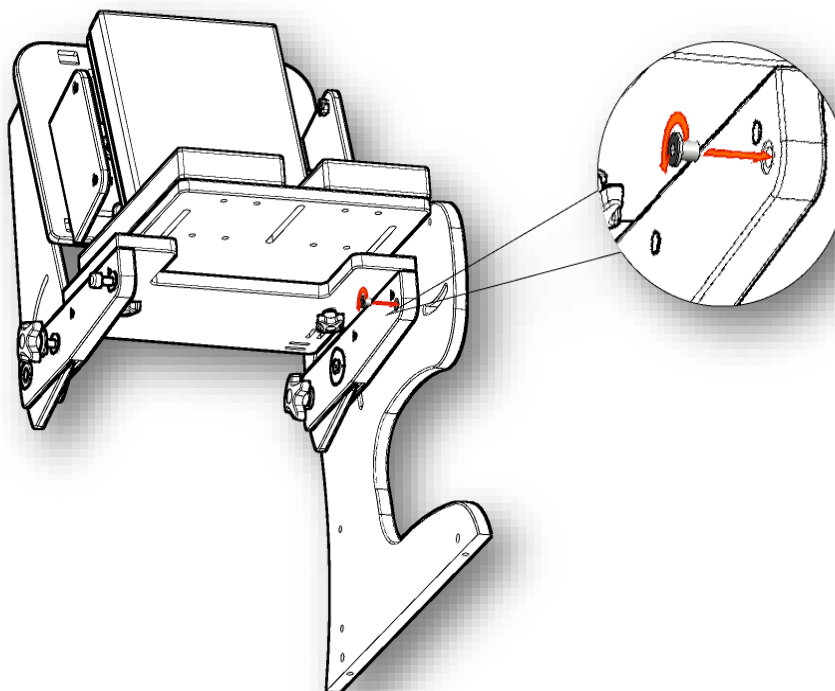


5. Prawidłowo zamontowany lewy bok Zebry (b).

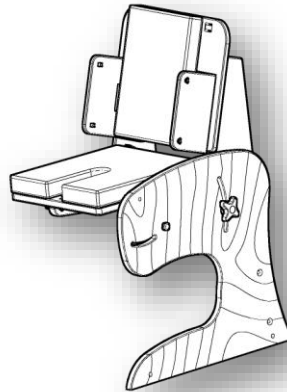

Kroki 2, 3, 4, 5 powtórzyć dla prawego boku (c). Poniżej prawidłowo zamontowane oba boki (b, c).

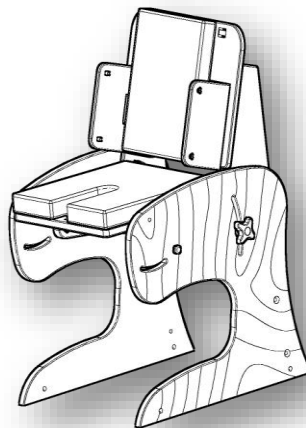


6. Włożyć nakrętki wałeczkowe (m) w otwory fi 10 w lewym boku Zebry.

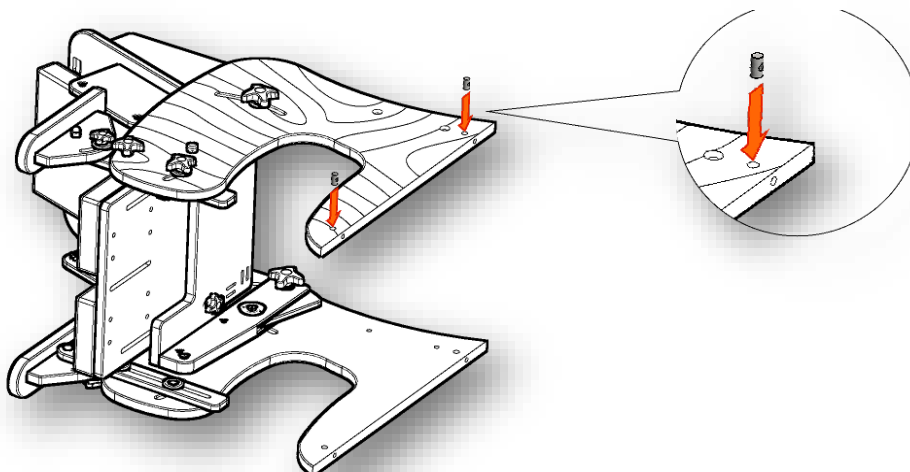


UWAGA: Nakrętki wkładać rozcięciem do wewnątrz fotelika.

7. Umieścić ramkę z kołami (e), jak na rysunku i przykręcić za pomocą dwóch śrub (k) i podkładek miseczkowych (l) do lewego boku Zebry.

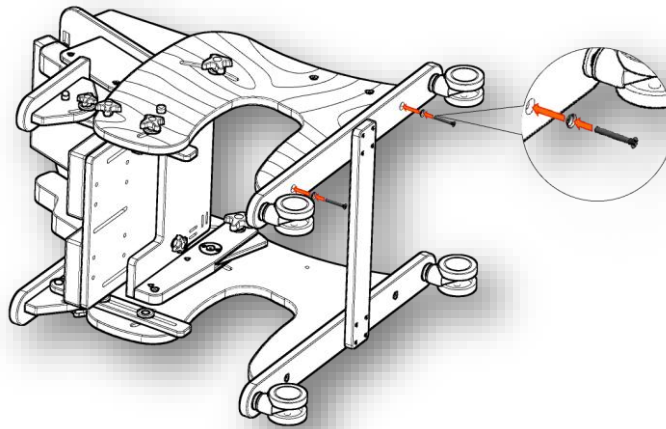


Kroki 6,7 powtórzyć na prawym boku

8. Umieścić żebro Zebry (d) jak na rysunku poniżej.

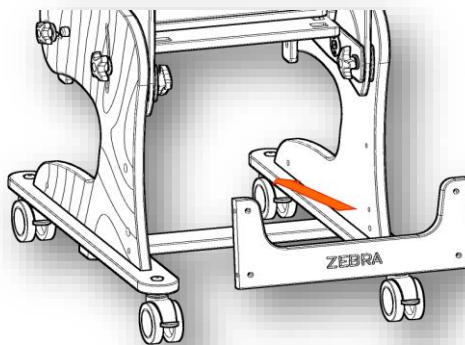


9. Włożyć nakrętki wałeczkowe (m) w otwory fi 10 w żeberku (z lewej strony).

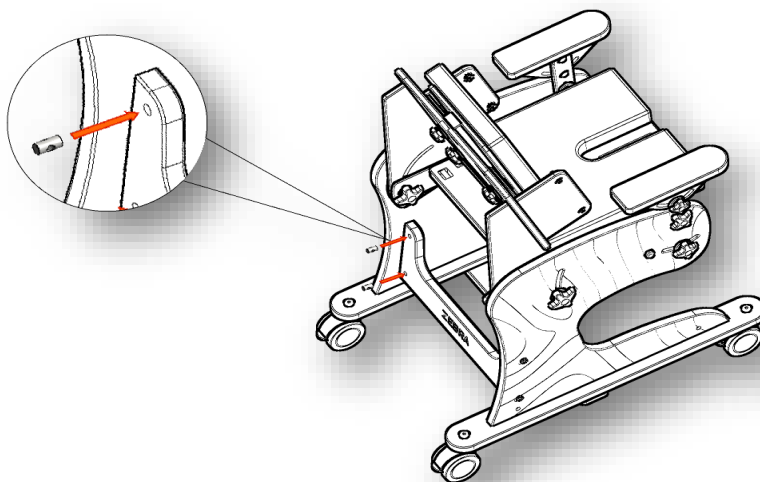




UWAGA: Nakrętki wkładać rozcięciem do wewnątrz fotelika.

10. Przykręcić żebro za pomocą śrub (k) i podkładek miseczkowych (l).

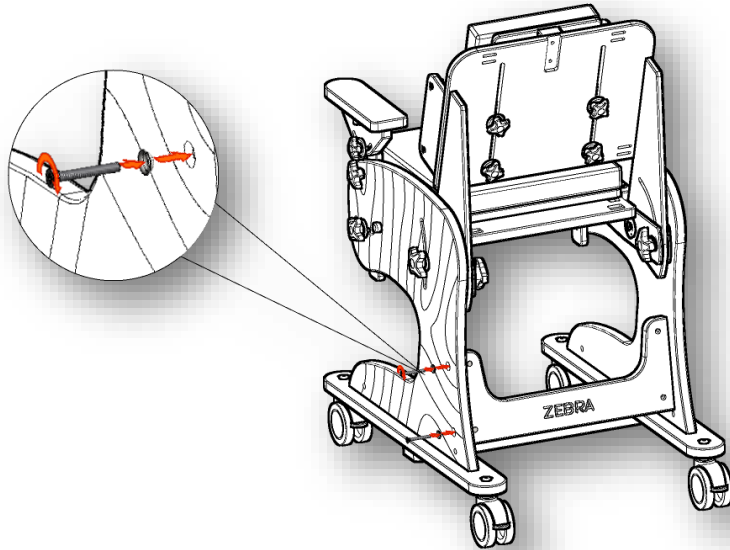

Kroki 9, 10 powtórzyć z prawej strony

11. Prawidłowo skręcony stelaż Zebry.

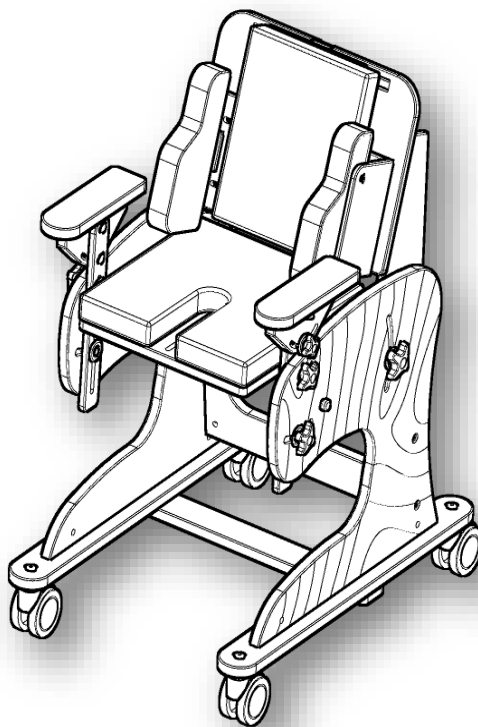


Etap II – Montowanie podnóżków



1. Na początek należy zdjąć poduszkę siedziska w celu odsłonięcia otworów mocujących podnóżki.



2. Umieścić pierwszy podnóżek (f) jak na rysunku poniżej.

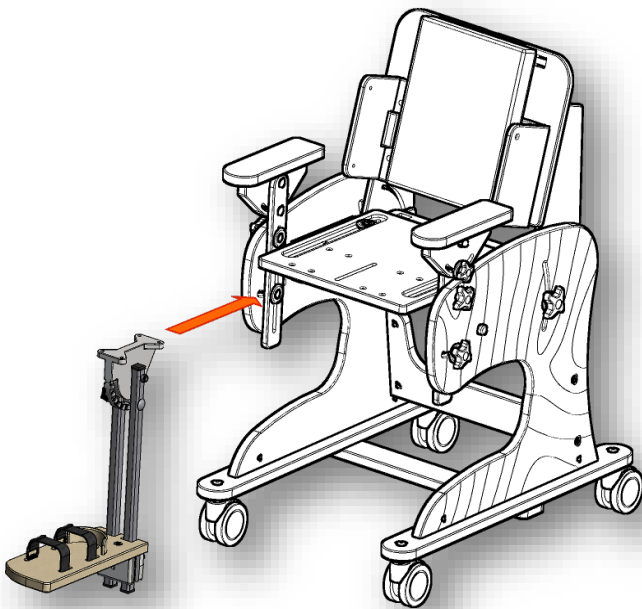


3. Przykręcić podnóżek (f) wkładając cztery śruby (w) od góry siedziska.

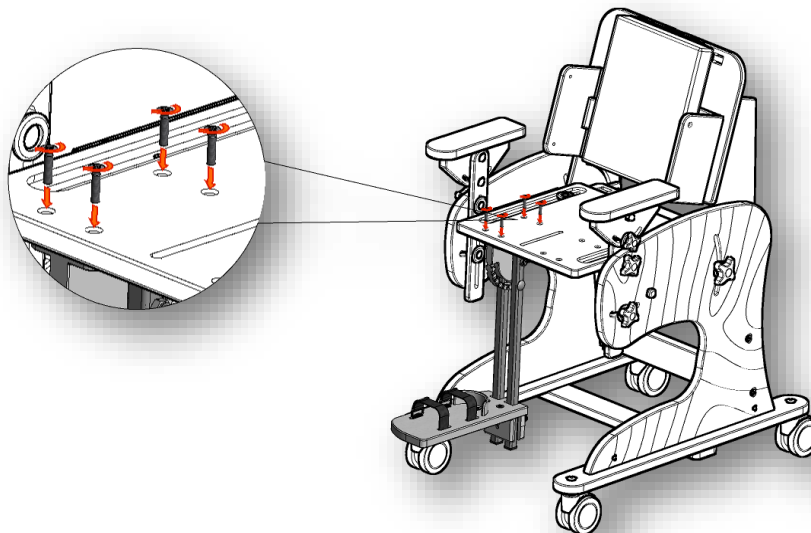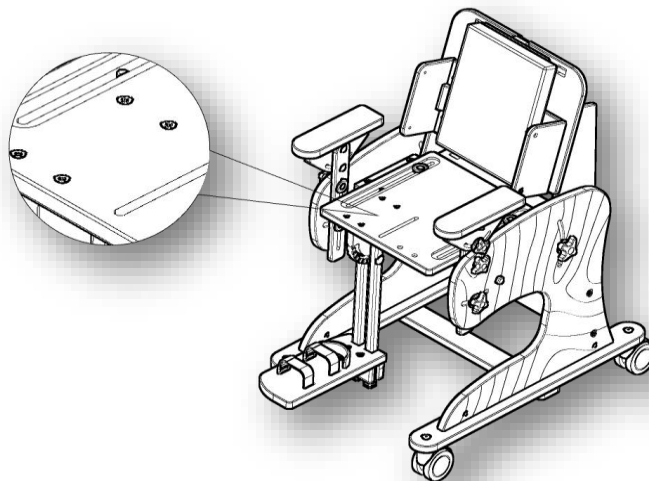


UWAGA- Operacje 2, 3 powtórzyć dla drugiego podnóżka.



4. Założyć poduszkę siedziska na swoje miejsce.

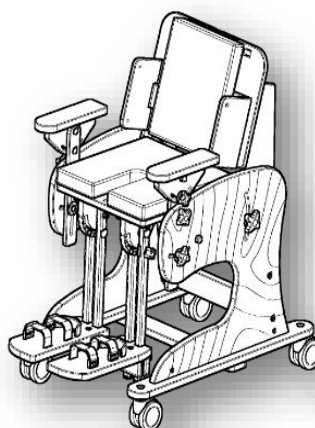

Etap III- Montaż klina


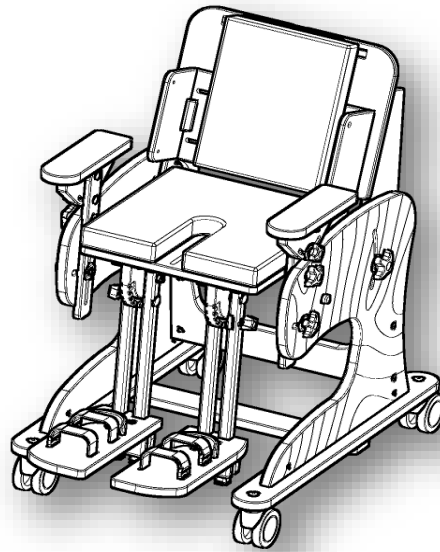


1. Ustawienie klina (g) jak na rysunku poniżej.

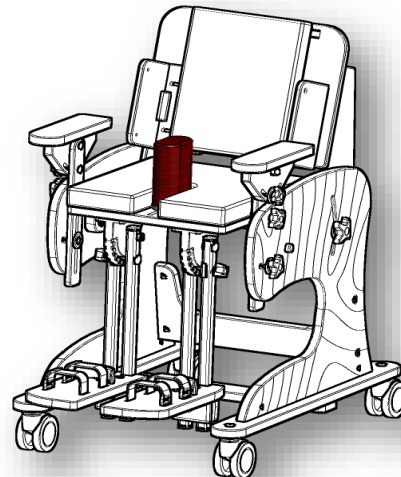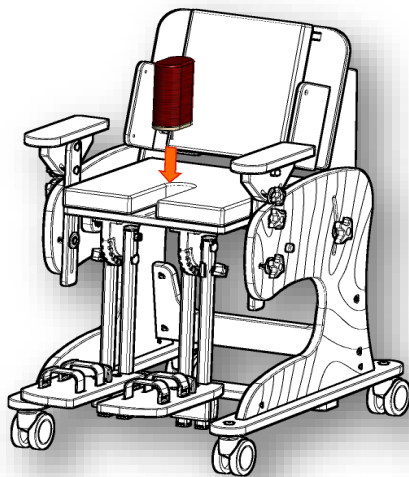


2. Przykręcenie klina za pomocą pokrętki (n), podkładki (o) i podkładki wpustowej (p) od spodu siedziska.



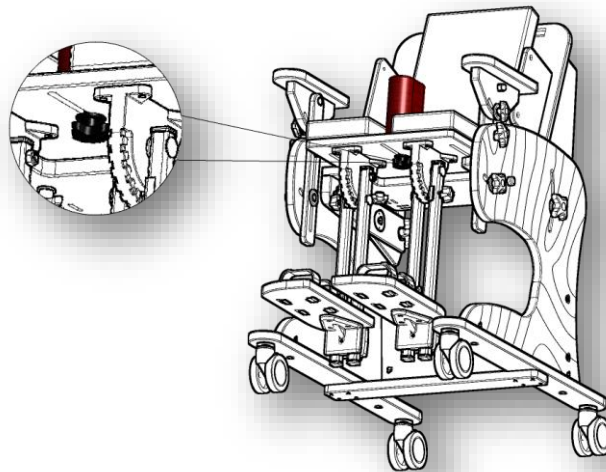
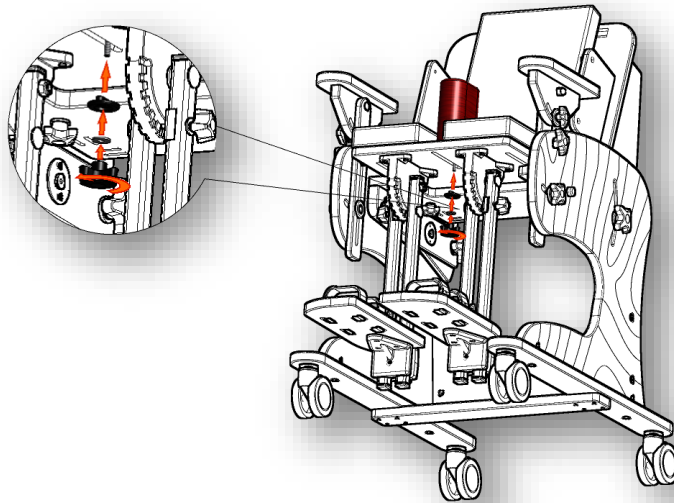


3. Poprawnie zamontowany klin (g).

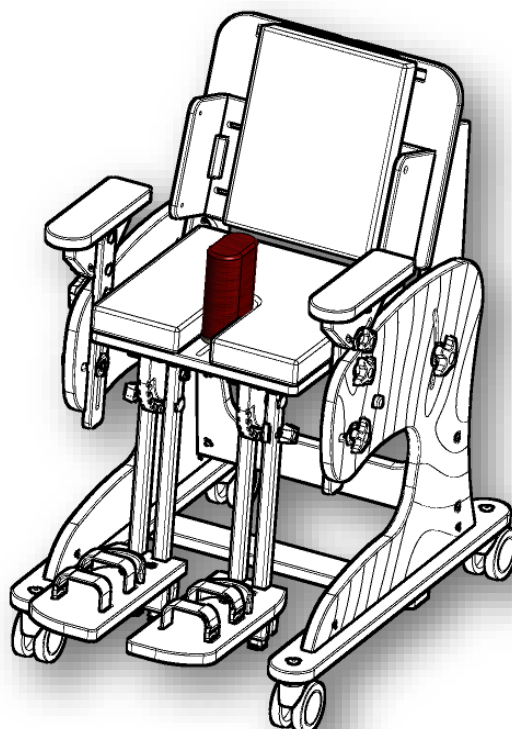


Etap IV – Montaż pelot bocznych

1. Ustawić prawą pelotę boczną (h) na swoim miejscu jak na rys. poniżej.

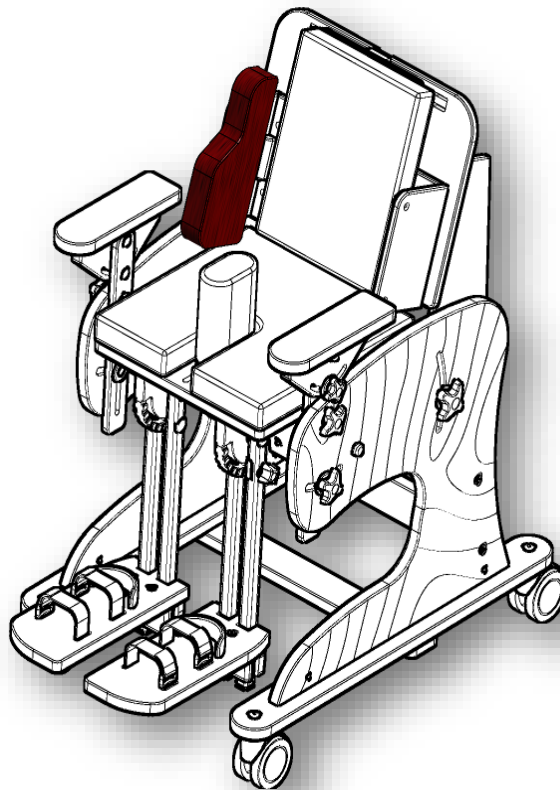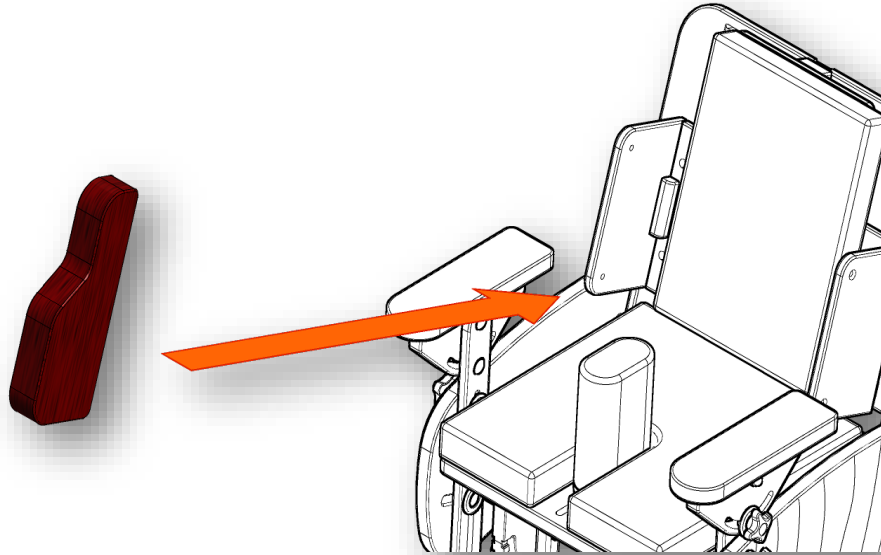

2. Przykręcić pelotę boczną (h) za pomocą dwóch śrub z łbem stożkowym M6x20 (v) , jak na rys. poniżej.

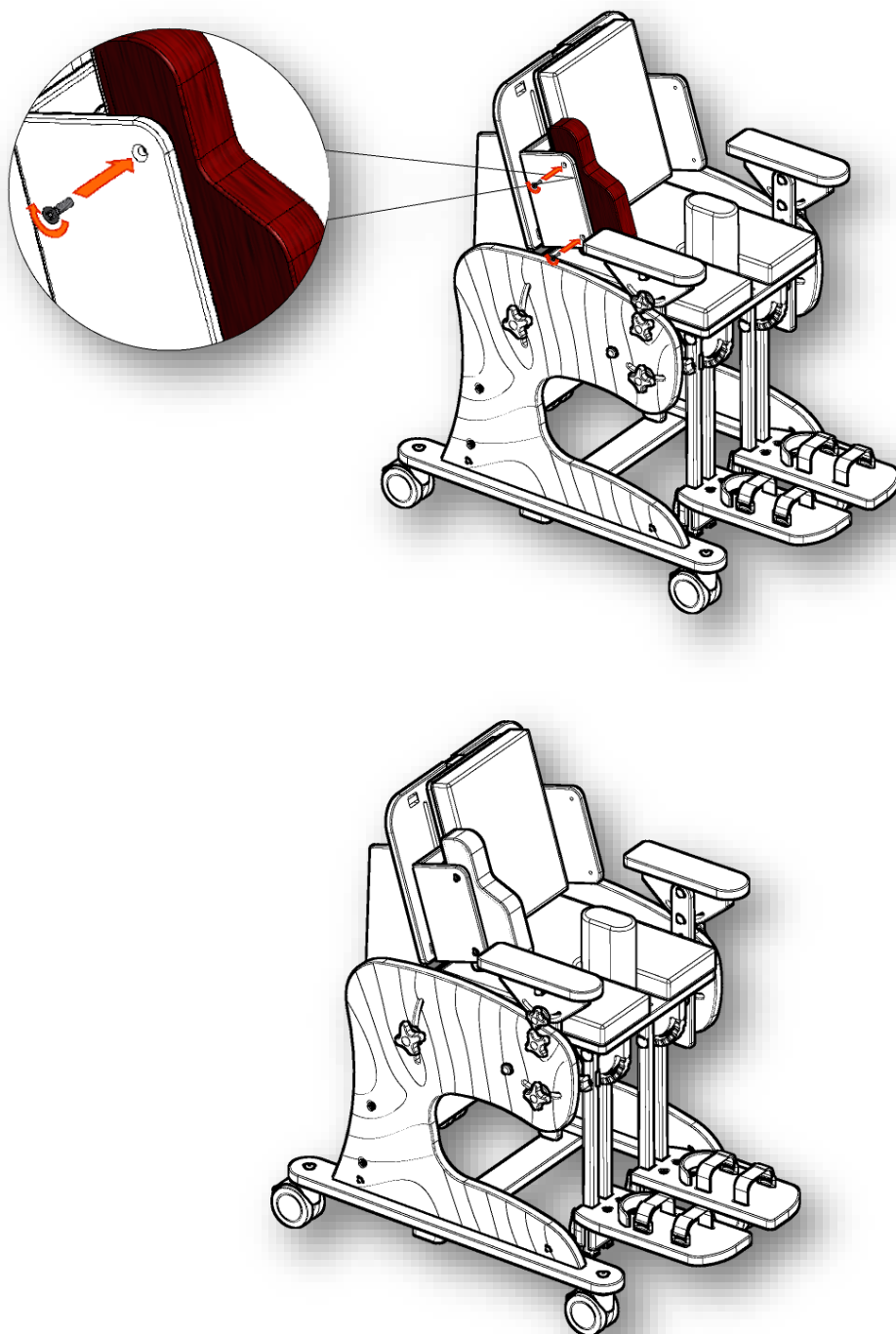


UWAGA- Operację 1, 2 powtórzyć dla lewej peloty (h).


3. Poprawnie zamontowane obie peloty.





Etap V – Montaż zagłówka

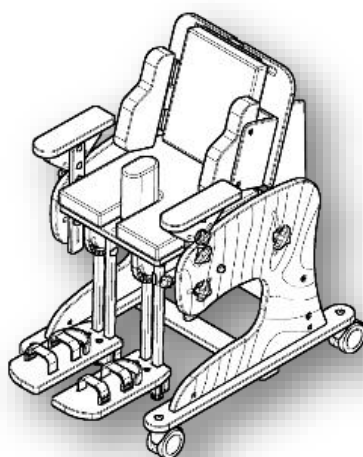


1. Ustawić zagłówek (j) jak na rysunku poniżej.

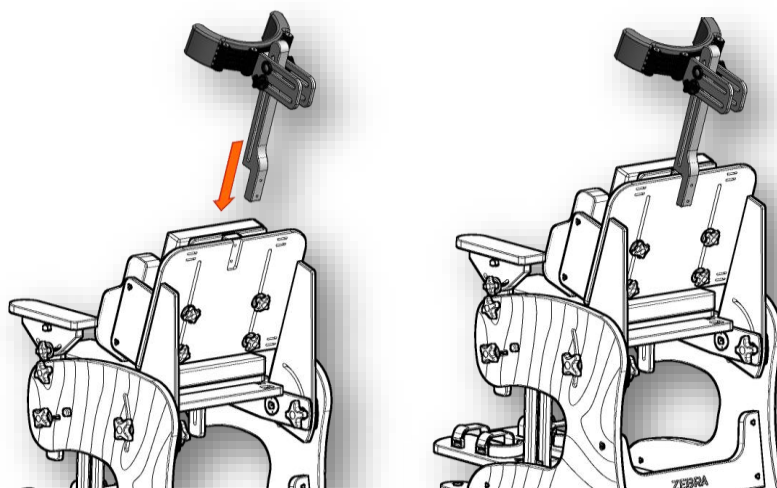

2. Przykręcić zagłówek (j) za pomocą dwóch wkrętów (r) z podkładkami (o).

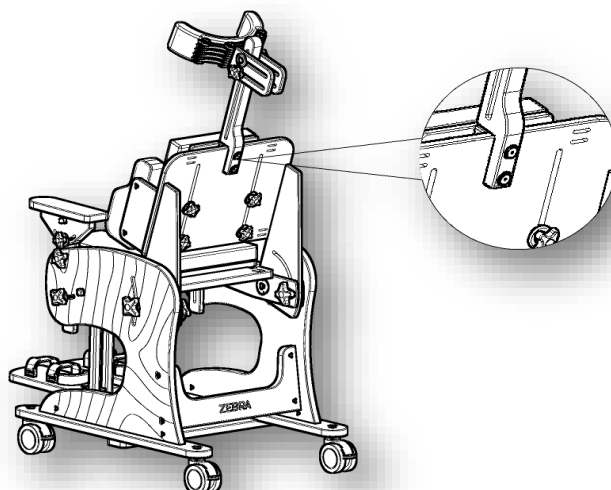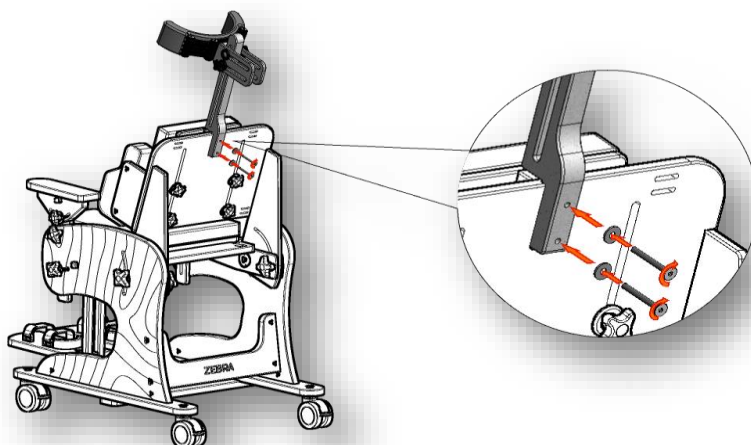


3. Poprawnie zamontowany zagłówek (j).

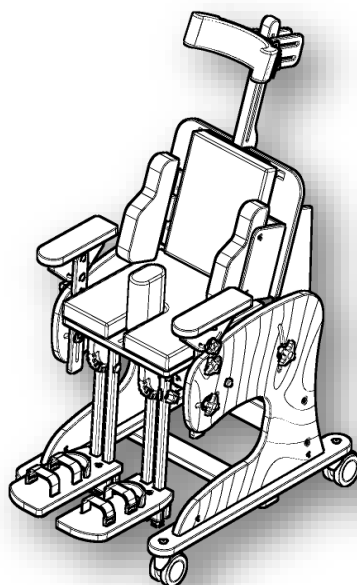


Etap VI – Montaż stolika


1. Umieścić stół (i) jak na rys poniżej.

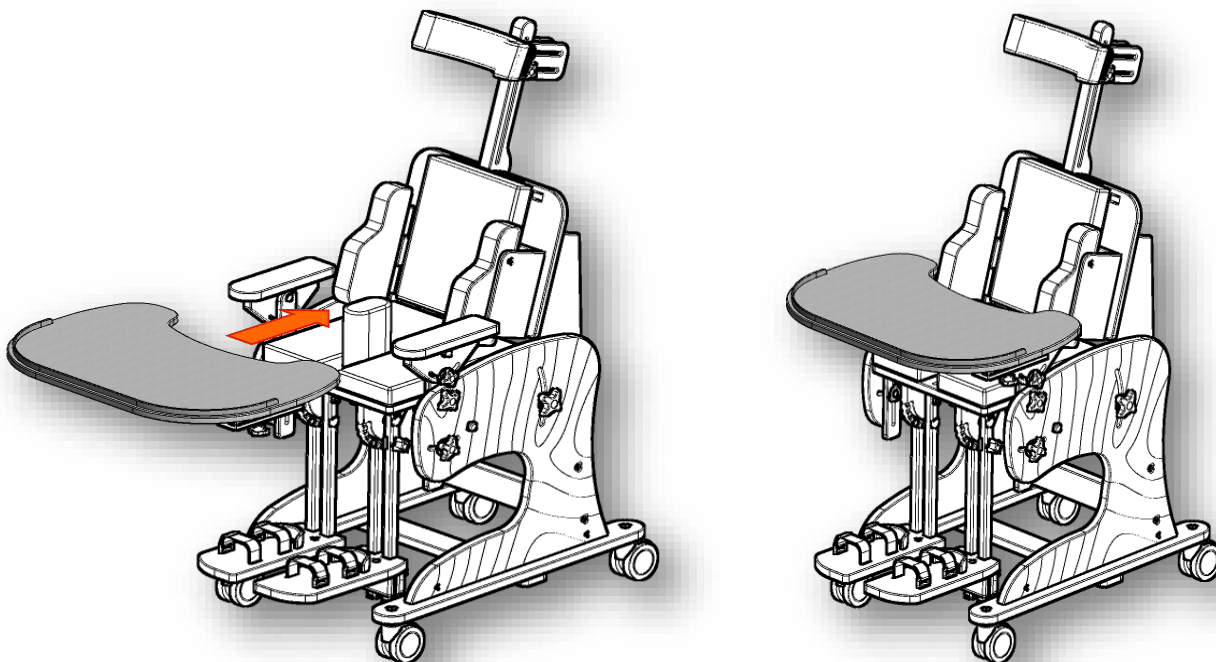

2. Ustawić i dokręcić stół (i) za pomocą pokręteł od spodu (w).

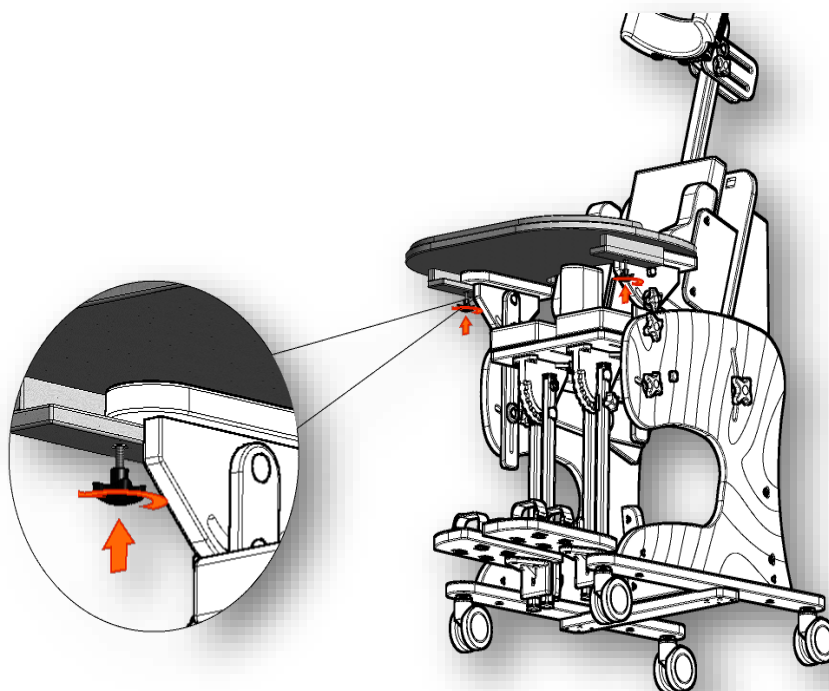

3. Poprawnie zamontowany stolik.

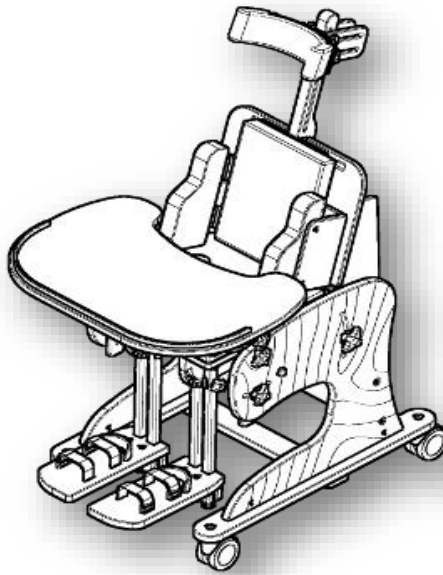



PRODUCENT PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH



Akces-MED. Sp. z o.o.

ul. Leszka Czarnego 3

35-615 Rzeszów

tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com

e-mail: akces-med@akces-med.com

Data wydania: 21.10.2014

Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2014



AKCES-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych
i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia