REH4MAT®
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

KOD KATALOGOWY	AM-SOB
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB
CODE	AM-SOB
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB




1. **PL:** Wsuń ortezę na ramię.
   EN: Put the brace on the shoulder.





2. **PL:** Zapnij pas piersiowy (1) z przodu i z tyłu na rzep.
   EN: Fasten the chest strap (1) at the front and back with Velcro.

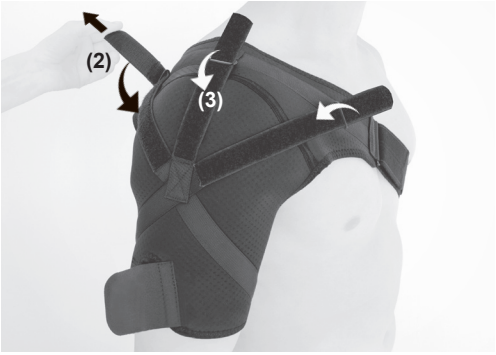



3. **PL:** Za pomocą pasów naramiennych (2,3,4) ustaw ramię w pożądanej pozycji.
   EN: Use the rotator cuff straps (2,3,4) for keeping the arm in the required position.



4. PL: Zapnij rzep ramienny (5).
EN: Fasten the shoulder velcro (5).





5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

© reh4mat.2020