ottobock.

GoOn
Orteza na goleń i stopę

Po prostu GoOn!



Informacja dla lekarzy

28U70 GoOn

Lekkie wsparcie, przy osłabieniu zgięcia grzbietowego stopy

U pacjentów z łagodnym osłabieniem zgięcia grzbietowego stopy, standardowe ortezy AFO są często zbyt obszerne. Są źle akceptowane przez użytkowników, którzy często zmieniają obuwie.

Orteza GoOn, to idealne rozwiązanie dla pacjentów, pragnących zaznajomić się z korzyściami, jakie oferuje nowe zaopatrzenie typu AFO. Orteza pomaga użytkownikowi trzymać stopę w pozycji neutralnej, czyli chodzić bezpiecznie i unikać potknięć. Dzięki grzbietowej, sprężystej szynie, podeszwa buta nigdy nie wchodzi w kontakt z ortezą. Pozwala to pacjentowi nosić praktycznie każdy typ obuwia, nosić buty na podwyższonym obcasie, a nawet nosić ortezę bez obuwia. Sprężyste włókna, umożliwiają indywidualną regulację siły unoszenia stopy: stopa jest delikatnie unoszona a tym samym lekko ustabilizowana i zabezpieczona przed skręceniem. W przeciwieństwie do podobnych rozwiązań, wykorzystujących podciągi gumowe, brakuje właśnie tego bezpośredniego kontaktu ortezy ze stopą.

Wskazania

Osłabienie zgięcia grzbietowego spowodowane:

- Zespołem zmęczeniowym
- Problemami z równowagą
- Otępieniem
- Chorobą Parkinsona
- Udarem
- Urazami mózgu
- Stwardnieniem rozsianym
- Zanikami nerwowo-mięśniowymi
- Porażeniem nerwu strzałkowego

Przeciwwskazania


- Spastyczność kończyn dolnych
- Obrzęk umiarkowany do dużego
- Owrzodzenia nóg
- Deformacje stóp
- Niestabilność stawu skokowego




Zalety w skrócie

- Uniwersalny rozmiar (rozmiary dla dorosłych)
- Łatwa obsługa i miękkie materiały o wysokim komforcie użytkowania
- Można nosić z lub bez obuwia, niezależnie od wysokości obcasa. Jeśli orteza jest używana bez obuwia, wymagany jest dodatkowy pasek Velcro (w komplecie)
- Wysoka propriocepcja, z uwagi iż produkt nie zakrywa pięty i przodostopia
- Łatwa do czyszczenia

Pozycjonowanie w katalogu produktów

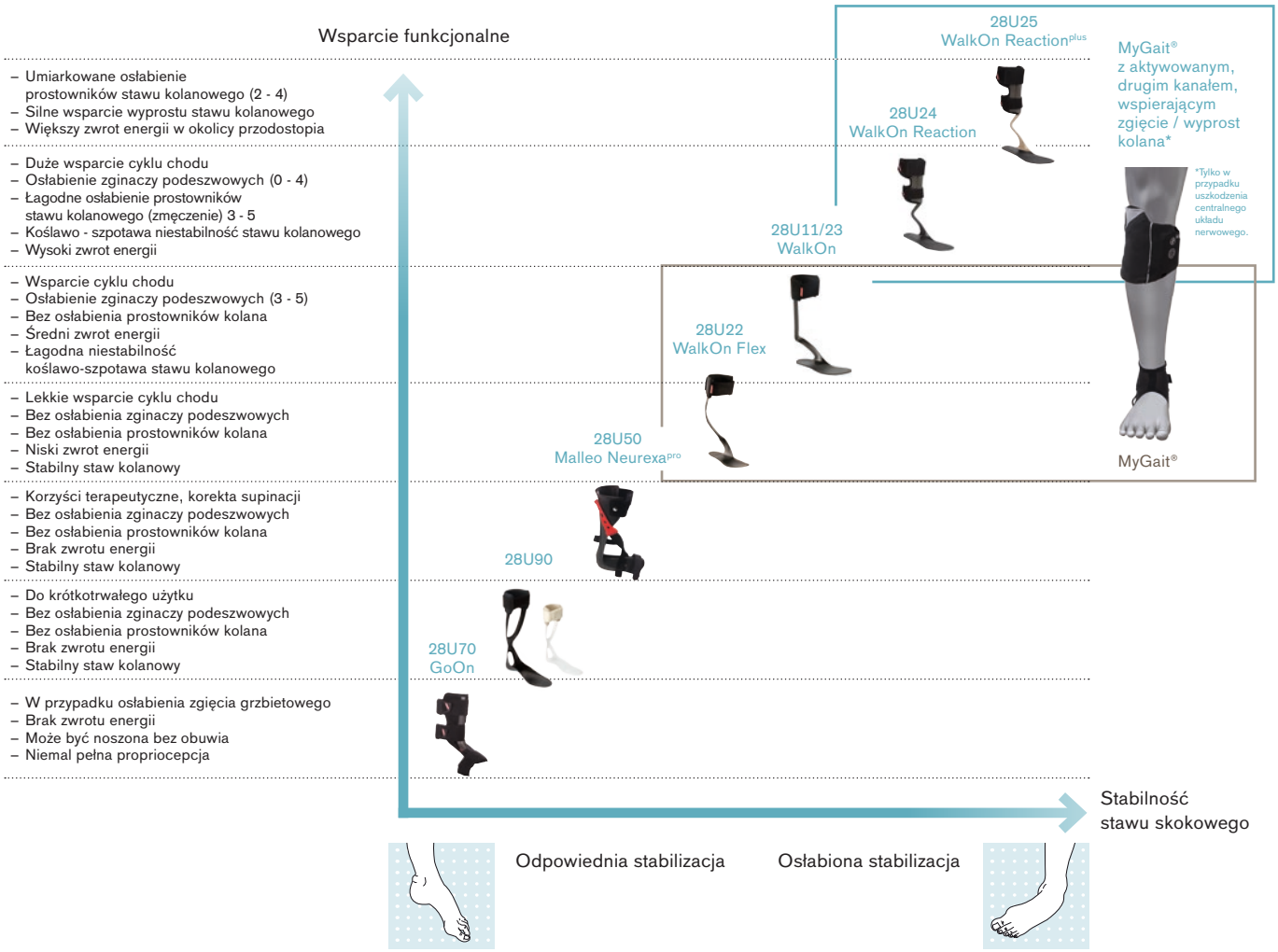

Wsparcie GoOn w cyklu chodu

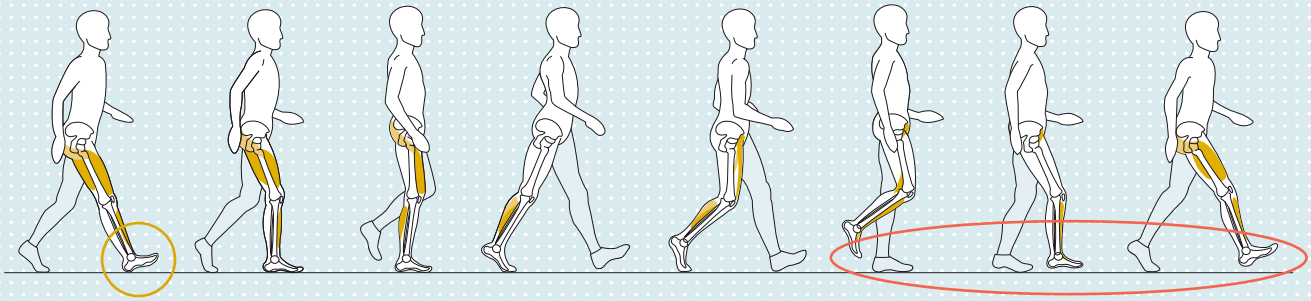

Ograniczona kontrola zgięcia podeszwowego

Wsparcie zgięcia grzbietowego w pozycji neutralnej w fazie przenoszenia

W razie dalszych pytań lub uzyskania szczegółowych informacji, prosimy Państwa o kontakt.

Otto Bock Polska sp. z o.o.
ul. Koralowa 3 · 61-029 Poznań
www.ottobock.pl

© Ottobock · 646D1127=M_PL-01-1608 · Zastrzegamy możliwość zmian parametrów technicznych oraz błędów w druku.