WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI

AURORA®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o**. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

MD

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI DNV·GL ISO 13485

Firma **Akces-MED Sp. z o.o**. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....5
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....5
3. Ogólna budowa wózka.....6
3.1 Wyposażenie standardowe.....6
3.2 Akcesoria.....7
4. Tabele rozmiarowe.....8
5. Opis obsługi wózka.....9
5.1 Rozkładanie wózka.....10
5.2 Składanie wózka.....11
5.3 Koła tylne pełne.....13
5.4 Koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy.....13
5.4.1 Demontaż kół przednich.....13
5.4.2 Blokada kierunku jazdy kół przednich.....13
5.5 Hamulec centralny.....14
5.6 Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (City/Comfort).....14
5.7 Regulowane oparcie.....15
5.8 Siedzisko z funkcją kubełkową.....15
5.9 Regulowany podnóżek.....16
5.9.1 Regulacja kąta pochylenia podnóżka.....16
5.9.2 Regulacja długości podnóżka.....17
5.10 Paski stabilizujące stopy.....17
5.11 5-punktowe pasy z osłoną.....18
5.12 Regulowany klin międzyudowy.....21
5.13 Barierka.....21
5.14 Zagłówek.....22
5.15 Daszek.....22
5.16 Regulowane peloty boczne.....23
5.17 Poduszki zawężające siedzisko.....23
5.18 Pokrowiec na nogi.....23
5.19 Kosz pod siedzisko.....24
5.20 Torba.....24
6. Montaż akcesoriów.....25
6.1 ***ARO_001*** *Światła LED*.....25
6.2 ***ARO_101*** *Pasy odwodzące uda*.....25
6.3 ***ARO_114*** *Kamizelka H / ARO_130 Kamizelka 4-punktowa*.....25
6.4 ***ARO_160*** *Anatomiczny zagłówek z podparciem głowy Octagon™*.....26
6.5 ***ARO_161*** *Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe*.....27

SPIS TREŚCI

*6.6 **ARO_162** Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22)*.....27
*6.7 **ARO_403** Stolik*.....27
*6.8 **ARO_415** Osłony na koła tylne / **ARO_442** Osłony na koła przednie*.....28
*6.9 **ARO_429** Miękka osłona na podnóżek*.....28
*6.10 **ARO_447** Mufki zimowe*.....28
*6.11 **ARO_448** Stolik samopoziomujący*.....29
*6.12 **ARO_509** Organizer*.....29
7. Użytkowanie wyrobu.....30
7.1 Przygotowanie użytkownika.....30
7.2 Przygotowanie wyrobu.....31
7.3 Instrukcja użytkowania kamizelek.....32
8. Zasady bezpieczeństwa.....35
9. Warunki gwarancji.....37
10. Konserwacja i czyszczenie.....37
11. Oznaczenia.....41
11.1 Symbole.....41
11.2 Przykładowa tabliczka znamionowa.....41

WSTĘP

AURORA® to nowoczesny wózek specjalny łączący w sobie konstrukcję nowej generacji z nowoczesnym wyglądem. Zaprojektowany dla najmłodszych użytkowników z dysfunkcjami narządów ruchu. Posiada najważniejsze cechy wózka terapeutycznego, jednocześnie w ogóle go nie przypominając. Dzięki zastosowaniu w nim sprawdzonych rozwiązań technicznych jest bezpieczny, stabilny i zarazem bardzo komfortowy.

Największą zaletą **AURORA®** jest wygodne wielofunkcyjne siedzisko z opcją przekładania przód-tył. Dzięki temu dziecko ma możliwość siedzenia przodem do kierunku jazdy obserwując otoczenie lub tyłem utrzymując kontakt wzrokowy z opiekunem. Funkcja kubełkowa pozwala na płynną regulację kąta pochylenia całego siedziska.

Regulowane poduszki oraz peloty zapewniają doskonałą stabilizację boczną. Dodatkowo istnieje możliwości zmiany wysokości zagłówka, kąta pochylenia oparcia oraz podnóżka.
Wózek **AURORA®** został wyposażony w amortyzowany system zawieszenia z możliwością jego regulacji. Do wyboru są dwa tryby: **City** do jazdy po płaskiej, równej drodze i **Comfort** do jazdy po trudnym, nierównym terenie.

Przednie skrętne koła z możliwością ich blokady dodatkowo ułatwiają manewrowanie wózkiem w ciasnych pomieszczeniach.
Standardowo wózek wyposażony jest w praktyczne dodatki: regulowany daszek, pokrowiec na nogi, pojemny kosz pod siedziskiem i pakowną torbę na niezbędne akcesoria. Wiele elementów odblaskowych zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Dostępny w **1** uniwersalnym rozmiarze. Możliwości regulacji pozwalają na dopasowanie go do indywidualnych potrzeb mniejszych lub większych dzieci.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiecie się, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt znami:
Konsultant medyczny: *tel. kom. +48 516 183 883*
Akces-MED Sp. z o.o.: *tel. +48 17 864 04 70*

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania wózka przed użytkowaniem, użytkowania wózka, sposobu konserwacji i czyszczenia.
Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.
Przed przystąpieniem do użytkowania wózka **AURORA®** użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

2. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.
Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - różne postacie,
- Przepuklinę oponowo - rdzeniową,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane - SM, stwardnienie zanikowe boczne - SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo - mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, z niedowładami i porażeniami.

Przeciwwskazania:

- Stan krytyczny użytkownika,
- Głęboka sedacja,
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedyczxnymi, w tym złamania kręgosłupa,
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- Niestabilność hemodynamiczna,
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- Zatorowość płucna,
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud,
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.

3. OGÓLNA BUDOWA WÓZKA

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1. Regulowany zagłówek
2. Regulowane peloty boczne
3. 5-punktowe pasy z osłoną
4. Barierka
5. Regulowany klin międzyudowy
6. Poduszki zawężające siedzisko
7. Przekładane siedzisko z regulowanym oparciem, z funkcją leżenia
8. Regulowany podnóżek z paskami stabilizującymi stopy
9. Koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy
10. Składany daszek
11. Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka
12. Torba
13. Tapicerka wodoodporna HYDRO™
14. Składana rama
15. Funkcja kubełkowa
16. Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (City/Comfort)
17. Koła tylne pełne z hamulcem centralnym
18. Kosz pod siedzisko
19. Folia przeciwdeszczowa
20. Pokrowiec na nogi



3.2 AKCESORIA


ARO_001
Światła LED


ARO_101
Pasy odwodzące uda


ARO_114
Kamizelka H


ARO_130
Kamizelka 4-punktowa


ARO_160
Anatomiczny zagłówek z podparciem głowy OCTAGON™


ARO_161
Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe


ARO_162
Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22)


ARO_403
Stolik


ARO_415
Osłony na koła tylne (2 szt.)


ARO_429
Miękka osłona na podnóżek


ARO_442
Osłony na koła przednie (2 szt.)



ARO_447
Mufki zimowe


ARO_448
Stolik samopoziomujący


ARO_509
Organizer

4. TABELE ROZMIAROWE



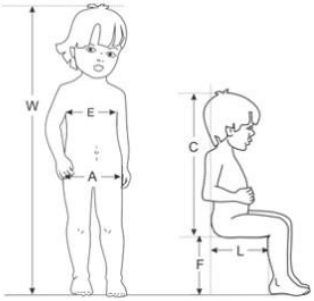

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**110**
A	**szerokość siedziska (z poduszkami)**	**[cm]**	**18**
A_1	**szerokość siedziska (bez poduszek)**	**[cm]**	**27**
L	**głębokość siedziska**	**[cm]**	**30**
C	**wysokość zagłówka**	**[cm]**	**43 - 51**
E	**szerokość oparcia (z poduszkami)**	**[cm]**	**20**
E_1	**szerokość oparcia (bez poduszek)**	**[cm]**	**28**
F	**długość podnóżków**	**[cm]**	**23, 26, 28**
	wysokość oparcia	[cm]	55
L_1	głębokość siedziska do klina	[cm]	11 - 22
	długość stopki	[cm]	18,5
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	110 - 180
Y	kąt pochylenia siedziska	[°]	0 - 30
Z	kąt pochylenia podnóżków	[°]	90 - 180
	max. waga użytkownika	[kg]	40

	Wymiary i waga sprzętu		Rozmiar 1
	Szerokość	[cm]	67
	Długość	[cm]	118
	Wysokość	[cm]	96
	Szerokość po złożeniu	[cm]	62
	Długość po złożeniu	[cm]	95
	Wysokość po złożeniu	[cm]	47
	Waga	[kg]	19

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wymiary gabarytowe są orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu. Wartości mierzone bez daszka.

* Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

5. OPIS OBSŁUGI WÓZKA

LEGENDA



Ikonka informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.



Ikonka informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.



Ikonka ostrzegawcza - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zastosować **szczególne środki ostrożności.**

5.1 ROZKŁADANIE WÓZKA

















Siedzisko możemy zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy (**zdj. 10 - 11**).


10


11

5.2 SKŁADANIE WÓZKA

Wyjąć siedzisko wciskając czerwone przyciski (**zdj. 12**) po obu stronach wózka i pociągając siedzisko do góry (**zdj. 13**).


12


13


14


15


16


17


18


19


20

Złożoną ramę wózka zabezpieczyć przy pomocy blokady zabezpieczającej (**zdj. 20**).

5.3 KOŁA TYLNE PEŁNE


21


22

5.4 KOŁA PRZEDNIE PEŁNE SKRĘTNE Z BLOKADĄ KIERUNKU JAZDY

5.4.1 DEMONTAŻ KÓŁ


23


24

5.4.2 BLOKADA KIERUNKU JAZDY KÓŁ PRZEDNICH


25

BLOKOWANIE KÓŁ - OBRÓĆ ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA


26

ZWOLNIENIE BLOKADY KÓŁ - OBRÓĆ PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA

5.5 HAMULEC CENTRALNY



27 HAMULEC AKTYWNY



28 HAMULEC NIEAKTYWNY

5.6 DWUSTOPNIOWY UKŁAD JEZDNY Z AMORTYZATORAMI (CITY/COMFORT)

Wózek wyposażony jest w dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (**City/Comfort**). Amortyzację reguluje się za pomocą dźwigni znajdującej się przy amortyzatorze, obok tylnego koła (**zdj. 29 - 30**).

- **City** (sztywna) (**zdj. 29**) - ustawiona jest wtedy, gdy dźwignia wskazuje kierunek zgodny z kierunkiem jady wózka. Służy do jazdy po równych, twardych nawierzchniach (np. do jazdy po asfalcie).
- **Comfort** (miękka) (**zdj. 30**) - ustawiona jest wtedy, gdy dźwignia wskazuje kierunek przeciwny do kierunku jazdy wózka. Służy do jazdy po drogach nierównych, wyboistych.



29 CITY



30 COMFORT

5.7 REGULOWANE OPARCIE




Uchwyt znajdujący się z tyłu oparcia pociągnąć w górę (**zdj. 31**), ustawić oparcie pod żądanym kątem, zwolnić uchwyt.

Regulacja kąta pochylenia oparcia odbywa się stopniowo (**zdj. 32**).

Zabrania się regulować oparcie kiedy w wózku znajduje się użytkownik!



5.8 SIEDZISKO Z FUNKCJĄ KUBEŁKOWĄ

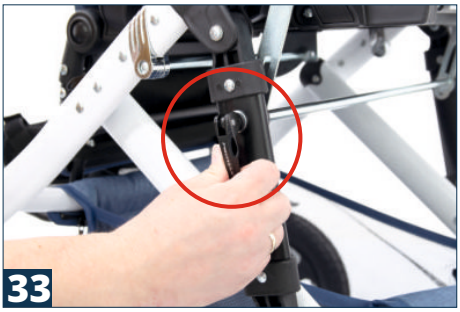

Wózek posiada możliwość płynnej zmiany kąta nachylenia siedziska.

1. Zwolnić dźwignię zaciskową (**zdj. 33**).
2. Ustawić żądany kąt pochylenia (**zdj. 34**).
3. Docisnąć dźwignię zaciskową.


34

Każdorazowo, po dociśnięciu dźwigni upewnić się, że siedzisko zostało zablokowane.
Przed zwolnieniem dźwigni należy mocno chwycić siedzisko wózka.
Zabrania się regulować kąt nachylenia siedziska, gdy w wózku znajduje się użytkownik!

5.9 REGULOWANY PODNÓŻEK

5.9.1 REGULACJA KĄTA POCHYLENIA PODNÓŻKA


35


36

Każdorazowo, po dociśnięciu dźwigni upewnić się, że podnóżek został zablokowany.

5.9.2 REGULACJA DŁUGOŚCI PODNÓŻKA


37

1. Wyjąć zapinkę znajdującą się w ramie podnóżka (**zdj. 37**).
2. Ustawić żądaną długość.
3. Włożyć zapinkę.

5.10 PASKI STABILIZUJĄCE STOPY


38


39


40


41

5.11 5-PUNKTOWE PASY Z OSŁONĄ


42


43


44


45


46


47


48

Ostrożnie podważyć i zdjąć plastikową pokrywę znajdującą się z boku siedziska (**zdj. 48**).

Dolny pasek z klamerką przeciągnąć przez otwór w tapicerce znajdujący się między oparciem, a siedziskiem wózka (**zdj. 49 - 50**).
Na pasek założyć regulator (**zdj. 51**).
Czynność (**zdj. 48 - 55**) powtórzyć z drugiej strony wózka.


49


50


51


52


53


54


55

Założyć poprzednio zdjęte plastikowe pokrywy na boki siedziska. Środkowy pasek włożyć razem z regulowanym klinem międzyudowym w jeden z otworów w siedzisku (**zdj. 56**).



56


57


58

Pasek wraz z klinem zabezpieczyć pokrętłem od spodu siedziska (**zdj. 59**). **Nie ma możliwości montażu pasów 5-punktowych bez regulowanego klina międzyudowego!**


59

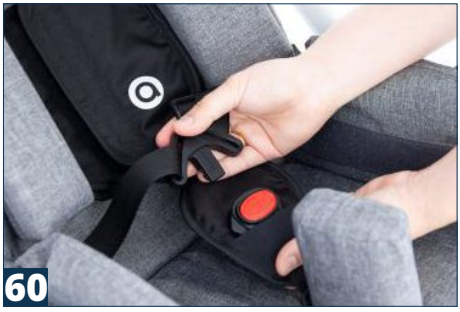
60


61

Przez rozpoczęciem użytkowania wózka, użytkownik powinien być bezwzględnie zapięty pasami 5-punktowymi lub kamizelką!
Upewnić się pociągając na pasy, czy są one prawidłowo zapięte!

5.12 REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY


62


63

5.13 BARIERKA


64


65


66


67

5.14 ZAGŁÓWEK

Aby zamocować zagłówek należy odsunąć zamki tapicerki po obu stronach oparcia (**zdj. 68**).


68


69


70


71


72

5.15 DASZEK


73

Daszek można wsunąć lub wysunąć z mocowań znajdujących się po obu stronach oparcia wózka wciskając jednocześnie przyciski znajdujące się przy daszku (**zdj. 73**).

5.16 REGULOWANE PELOTY BOCZNE


74

Zamocować peloty do tapicerki oparcia na żądanej wysokości za pomocą rzepów (**zdj. 74**).

5.17 PODUSZKI ZAWĘŻAJĄCE SIEDZISKO


75

Zamocować poduszki do tapicerki siedziska za pomocą rzepów (**zdj. 75**).

5.18 POKROWIEC NA NOGI


76


77

5.19 KOSZ POD SIEDZISKO


78


79

Maksymalne obciążenie kosza pod siedzisko wynosi 1,5 kg.
Przeciążenie kosza może powodować utratę stabilności wózka!

5.20 TORBA


80


81

Maksymalne obciążenie torby wynosi 1,5 kg.
Przeciążenie kosza może powodować utratę stabilności wózka!

Łączne obciążenie wózka wraz z użytkownikiem, zawartością torby oraz kosza pod siedzisko nie może przekroczyć 25 kg!

6. MONTAŻ AKCESORIÓW

6.1 ARO_001 ŚWIATŁA LED


82

Światła LED zaczepić w wybranym miejscu na ramie wózka.

6.2 ARO_101 PASY ODWODZĄCE UDA

Aby zamontować pasy odwodzące uda należy postępować zgodnie z instrukcją montażu pasów 5-punktowych z osłoną (montaż pasków dolnych) w rozdziale 5.11 (**5.11 5-PUNKTOWE PASY Z OSŁONĄ, str. 18 - 19**).


83


84

6.3 ARO_114 KAMIZELKA H
ARO_130 KAMIZELKA 4-PUNKTOWA

Aby zamontować kamizelkę H i kamizelkę 4-punktową należy postępować zgodnie z instrukcją montażu 5-punktowych pasów z osłoną w rozdziale 5.11 (**5.11 5-PUNKTOWE PASY Z OSŁONĄ, str. 18 - 19**).




ARO_114 KAMIZELKA H



ARO_130 KAMIZELKA 4-PUNKTOWA

Przed korzystaniem z kamizelki należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji.Informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z kamizelki znajdują się na stronie **32** instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu i życiu użytkownika.

6.4 ARO_160 ANATOMICZNY ZAGŁÓWEK Z PODPARCIEM GŁOWY OCTAGON™

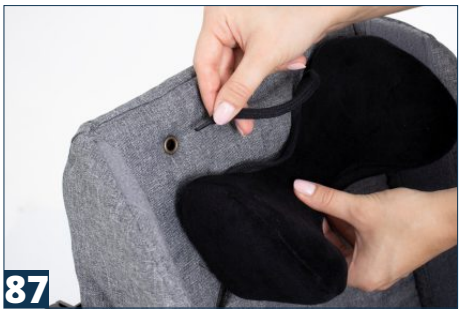







6.5 ARO_161 SANDAŁKI STABILIZUJĄCE STOPY I STAWY SKOKOWE


91



92

6.6 ARO_162 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK (FP-22)


93


94

6.7 ARO_403 STOLIK

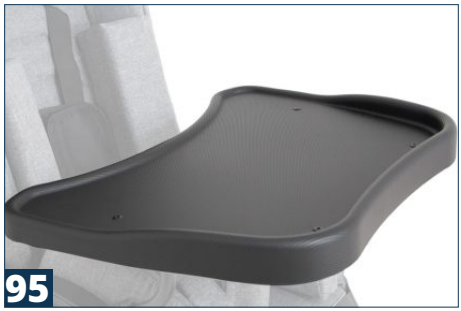
95

Podczas regulacji funkcji kubełkowej wózka, stolik pozostaje w niezmienionej pozycji w odniesieniu do siedziska.

6.8 ARO_415 OSŁONY NA KOŁA TYLNE
ARO_442 OSŁONY NA KOŁA PRZEDNIE


96


97

6.9 ARO_429 MIĘKKA OSŁONA NA PODNÓŻEK


98


99

6.10 ARO_447 MUFKI ZIMOWE


100


Rozpiąć napy po obu stronach mufek, założyć je na uchwycie do prowadzenia wózka, zapiąć napy.

6.11 ARO_448 STOLIK SAMOPOZIOMUJĄCY


100

Do spodu blatu stolika dołączony jest za pomocą rzepów velcro worek wypełniony granulatem. Posiada on kieszeń, która umożliwia dostosowanie ilości granulatu w zależności od potrzeb.
Uwaga! Dodatkowy woreczek z granulatem dostępny w ofercie.

6.12 ARO_509 ORGANIZER

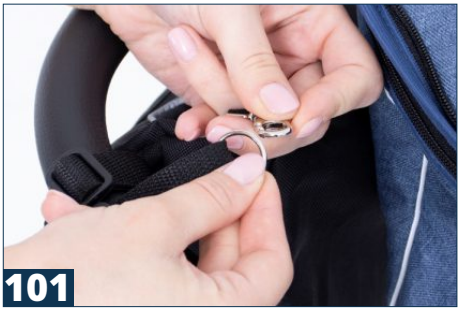
101


102


103

7. UŻYTKOWANIE WYROBU



Przed przystąpieniem do użytkowania wózka **AURORA®** należy zapoznać i stosować się do niniejszej instrukcji obsługi. Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

7.1 PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, nie krępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące stawy skokowe,
- użytkownik nie był umieszczany w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką, ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.



Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!

7.2 PRZYGOTOWANIE WYROBU

1. **Aby przystąpić do prawidłowego użytkowania należy:**
   - rozłożyć wózek,
   - ustawić na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wózka, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury,
   - upewnić się, że wszystkie części wózka są sprawne, należycie zamocowane i stabilne,
   - aktywować hamulce,
   - dopasować urządzenie do wymiarów użytkownika,
   - odpiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, aby swobodnie umieścić użytkownika w wózku,
   - zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika (jeżeli występują),
   - ustawić klin międzyudowy,
   - zamontować stolik (jeżeli występuje).

2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.

Podczas pokonywania przeszkód (progi, krawężniki itp.) należy unieść przednie koła poprzez naciśnięcie rączki do dołu, umieścić je na stopniu, a następnie umieścić na nim koła tylne poprzez podniesienie tylnej części wózka za rączkę w górę. Należy uważać, aby nie przechylić wózka zbytnio do tyłu! Podczas pokonywania wzniesień lub pojazdów zawsze należy ustawić wózek przodem do kierunku jazdy.

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

Wózek będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowany do wymiarów i potrzeb użytkownika. Główną zasadą przy dopasowywaniu wózka jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować jego dyskomfort. Nieumiejętne korzystanie z wózka może prowadzić do utrwalania nieprawidłowych wzorców postawy.

7.3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KAMIZELEK

Kamizelka zapewnie wsparcie postawy u osób siedzących na wózkach inwalidzkich, fotelikach lub innych siedziskach rehabilitacyjnych.
Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala utrzymać prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji kamizelka nie ogranicza możliwości swobodnych ruchów kończyn górnych.
Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika!

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki:

1) **Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi użytkownika, utrudniając mu oddychanie** - należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika.

2) **Użytkownik zsuwa się z siedziska, górny brzeg kamizelki obejmuje jego szyję i blokuje jego tchawicę utrudniając oddychanie** - z kamizelką **ZAWSZE** należy stosować wyposażenie stabilizujące miednicę takie jak np. pas biodrowy, aby zapobiec zsuwaniu się z wózka.

3) **Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę będą uciskać szyję użytkownika utrudniając oddychanie w przypadku, gdy użytkownik został w niewłaściwy sposób zabezpieczony w wózku** - należy wówczas dodatkowo ustabilizować tułów użytkownika przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować tułowia, należy wymienić je na urządzenie posiadające taką funkcję.

4) **Kamizelka jest zbyt mocno dociągnięta do oparcia, wyniku czego użytkownik nie może swobodnie oddychać** - w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę, aby pomiędzy kamizelką, a ciałem użytkownika opiekun mógł swobodnie wsunąć dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu użytkownika, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej np. kamizelki **Flex-Point®**, która nie utrudnia użytkownikowi oddychania.

Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

1) Upewnij się, że użytkownik siedzi w najlepszej możliwej pozycji :
   - na środku siedziska,
   - głęboko w siedzisku w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa przylegał do oparcia.
2) Zabezpiecz miednicę użytkownika za pomocą np. pasa biodrowego.
3) Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla użytkowników ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają ruchy opadania tułowia na bok, które mogą prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję.
4) Zamontuj i dopasuj kamizelkę:
   - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był okolicach podbrzusza użytkownika. Dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne!
   - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
   - zapnij pasy naramienne kamizelki,
   - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
5) Sprawdź pozycję użytkownika:
   - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi użytkownika,
   - upewnij się, że możesz wsunąć dłoń między ciało użytkownika, a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki należy stosować się do poniższych zasad:

1) Pozycja kamizelki **MUSI** bezwzględnie zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu użytkownika na siedzisku.
2) Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie użytkownika przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka **MUSI** być używana przez cały czas z zabezpieczeniem miednicy użytkownika (np. za pomocą pasa biodrowego). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami, takimi jak pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pasy odwodzące uda, pozycja kubełkowa i odchylane oparcie.
3) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby całe stopy użytkownika miały stabilne podparcie. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w podparcie dla stóp, stopy użytkownika muszą pewnie opierać się o podłoże.

4) Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubełkowej może mieć wpływ na skuteczność pasów i podpór!
5) Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeśli użytkownik ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogłyby prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję użytkownika.
6) Montażu i dopasowania kamizelki do użytkownika może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
7) Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub wymiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!
8) Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika!
9) Nie należy zostawiać użytkownika w urządzeniu bez opieki!
10) Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
11) Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad użytkownikiem są zaznajomione z zasadami jej bezpiecznego stosowania.

Dbanie o kamizelkę

Kamizelka działa skutecznie tylko wtedy, gdy utrzymana jest w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdź, czy:

1) Paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte. Jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe.
2) Paski kamizelki nie są zaczepione o koła urządzenia.
3) Klamry nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę na nowe.
4) Zapięcie na rzep mocno się trzyma. Jeśli nie, należy usunąć z rzepa wszelkie zanieczyszczenia lub zlecić jego wymianę na nowy.
5) Nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do użytkownika, ze względu na jego wzrost, przyrost/utratę wagi.
6) Szelki kamizelki należy tak wyregulować, aby nie były zbyt luźne lub zbyt ciasne.
7) Należy regularnie czyścić kamizelkę ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wózek **AURORA®** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
Przed każdym użyciem należy przygotować podopiecznego i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie wózka **AURORA®** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty o prawidłowym doborze wózka.

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1) Przed każdorazowym użyciem wózka należy:
   - sprawdzić wózek pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji wózka,
   - upewnić się, czy wszystkie części są poprawnie zamontowane, a wózek nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji,
   - sprawdzić, czy nie zostały poluzowane śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.,
   - sprawdzić stan tapicerki, czy nie posiada śladów uszkodzenia,
   - sprawdzić sprawność hamulców,
   - sprawdzić prawidłowość działania sprzączek,
   - zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm,
   - dopasować wózek do wymiarów i potrzeb użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie oparcia, siedziska, zagłówka, 5-punktowych pasów bezpieczeństwa, klina (jeśli dotyczy),
   - upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień wózka są stabilne i zablokowane,
   - zabezpieczyć użytkownika dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wózka. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m. in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia,
   - w przypadku występowania u użytkownika nadmiernego napięcia w obrębie przywodzicieli kończyn dolnych zalecane jest stosowanie wybranych pasów odwodzących uda w celu zapobiegania powstawaniu odciśnięć i/lub odleżyn w okolicy stawów kolanowych od strony przyśrodkowej.
2. Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania wózka, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiejkolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w wózku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu opiekuna, który zapoznał się z instrukcją obsługi.
6. Zabrania się pozostawiania wózka z użytkownikiem bez opieki na terenie pochyłym lub nierównym.
7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.

8. Wsiadanie i wysiadanie użytkownika z wózka zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu.
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wsiadania i wysiadania z wózka użytkownik nie stawał na podnóżku.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wózka kończyny użytkownika nie dostały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Wózek należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy wysokiej temperatury. Wózek nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu wózka bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wózka podczas transportu.
13. Przed użyciem wózka należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.

Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Zabrania się przewożenia użytkownika w wózku w środkach transportu (np. samochodzie, autobusie, pociągu).

Produkt zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Należy pamiętać o tym, że wszelkie obciążenia zawieszone na rączce wózka mogą zaburzyć jego stabilność!

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 8 instrukcji.

9. WARUNKI GWARANCJI

- Akces-MED Sp. z o.o. sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- Wózek **AURORA®** jest objęty **24-miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że wózek jest przedmiotem refundacji. W takim przypadku użytkownik może wystąpić do NFZ o refundację na naprawę wózka w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- Producent określa czas użytkowania wózka na **48 miesięcy**. Po tym okresie użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu.
- W razie uszkodzenia wózka należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** (tel. +48 17 864 04 73).

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wózek **AURORA®** będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wózka są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów wózka:

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym.
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy przetrzeć czystą wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.
4. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
5. Tapicerki nie należy zamaczać!
6. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tapicerki przed kolejnym czyszczeniem.
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.

9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wózka podczas korzystania z niego przez użytkownika.
10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.
11. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych, plastikowych, drewnianych oraz tapicerskich elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczonego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnię płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.

Przed ponownym użyciem wózka, tapicerka zawsze musi być sucha!
Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących wytwórca Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń,
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo dokręcone, niezniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koło,
- sprawdzić, czy konstrukcja wózka nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji,
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone,
- sprawdzić, czy paski kamizelki, pasów tułowia, stabilizacji stóp itp. nie są postrzępione, a sprzączki, rzepy i klamry działają prawidłowo,
- sprawdzić, czy tapicerka techniczna nie posiada oznak zniszczenia oraz czy jest poprawnie zapięta.

Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.
W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).**



PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	**Sprawdzić:** • cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulce.	**Sprawdzić:** • unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, • czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, • czy koła nie są zabrudzone. Oczyścić koła z wszelkich zanieczyszczeń.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	**Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, w szczególności sprawdzić:** • poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), • poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzyudowy, podłokietniki, podnóżki.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	**Sprawdzić:** • elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego . Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki po-karmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, szybkozłącza (jeśli dotyczy).	**Sprawdzić:** • czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy oś, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwująco smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	**Sprawdzić:** • stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	**Sprawdzić:** • stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	**Sprawdzić:** • ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	**Sprawdzić:** • oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.


Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie www.akces-med.com, przy wybranym produkcie.

11. OZNACZENIA

11.1 SYMBOLE

- Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE
- Numer katalogowy
- Numer seryjny
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi
- Uwaga!
- Wytwórca
- Data produkcji
- Wyrób nie zawiera lateksu
- Przechowywać w suchym miejscu
- Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających
- Chronić przed promieniami słonecznymi
- Ograniczenie temperatury przechowywania
- Wilgotność względna przechowywania
- Suszyć pionowo
- Nie chlorować
- Nie prasować
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie wybielać
- Ostrożnie, delikatna zawartość
- Zakaz zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z użytkownikem jak i bez
- Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
- Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.
- Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu.
- Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.

11.2 PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA

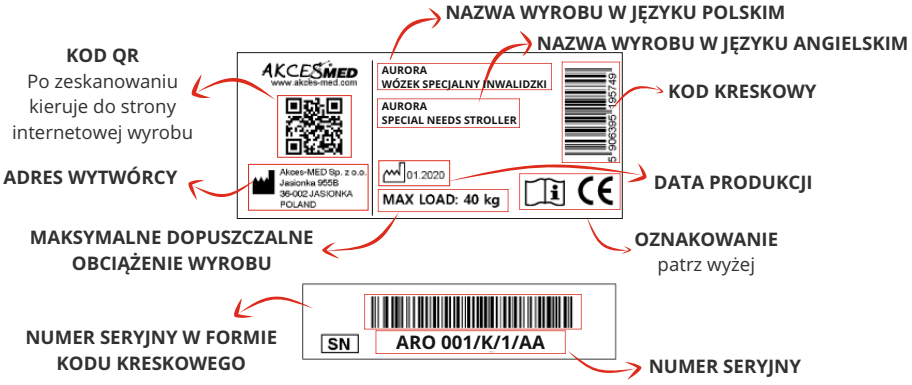

WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619

Autoryzowany Przedstawiciel

akces-med.com

Data wydania: 06.05.2019
Data ostatniej aktualizacji 24.05.2021
©Sławomir Wroński 2021