Dominator evo pro™

WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI



akces-med.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

⚠ UWAGA

Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy Akces-MED Sp. z o.o. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.

Firma Akces-MED Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu.



Spis treści

Wstęp....04
1. Przeznaczenie instrukcji....05
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu....05
3. Ogólna budowa wyrobu....07
4. Tabela rozmiarowa....08
5. Opis obsługi wyrobu....10
   - 5.1 Rozkładanie wyrobu....10
   - 5.2 Składanie wyrobu....12
   - 5.3 Regulowany podnóżek....13
   - 5.4 Regulacja pelot głowy....14
   - 5.5 Regulacja pelot piersiowych z pasem....15
   - 5.6 Regulacja pelot biodrowych....16
   - 5.7 Regulacja głębokości siedziska....16
   - 5.8 Regulacja pochylenia oparcia....17
   - 5.9 Regulacja wysokości oparcia....17
   - 5.10 Funkcja kubełkowa....18
   - 5.11 Regulacja klina międzyudowego....19
   - 5.12 Regulacja podłokietników....19
   - 5.13 4-punktowe paski stabilizujące stopy....20
   - 5.14 Hamulce zwalniające (ręczne)....22
6. Użytkowanie wyrobu....23
   - 6.1 Przygotowanie użytkownika....23
   - 6.2 Wsiadanie i zsiadanie z wyrobu....23
   - 6.3 Przyjęcie pozycji siedzącej....25
   - 6.4 Pozycja podczas jazdy wózkiem specjalnym inwalidzkim....25
   - 6.5 Jazda wózkiem specjalnym inwalidzkim....26
   - 6.6 Instrukcja użytkowania kamizelek....27
7. Zasady bezpieczeństwa....30
8. Warunki gwarancji....32
9. Konserwacja i czyszczenie....33
10. Oznakowanie....37

Wstęp

DOMINATOR EVO Pro™ to wózek specjalny, dedykowany najbardziej wymagającym użytkownikom. Jego system zabezpieczeń i regulacji sprawia, że sprawdza się zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych z ograniczoną mobilnością. Sprawdzi się do użytku domowego, w ośrodkach rehabilitacyjnych czy podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Wózek DOMINATOR EVO Pro™ został wyposażony w płynną i bezpunktową regulację wysokości oparcia, głębokości siedziska oraz długości podnóżka, co umożliwia dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkownika i pozwala dostosować jego wymiary do zmieniającego się z czasem wzrostu.

Z dwoma dużymi kołami tylnymi oraz przednimi mniejszymi, skrętnymi, wózkiem DOMINATOR EVO Pro™ można manewrować pomiędzy pomieszczeniami czy przeszkodami. Jest polecany dla osób, u których dysfunkcje narządu ruchu wymagają wysokiego poziomu wsparcia, komfortu i bezpieczeństwa podczas długotrwałego użytkowania wózka. Odpowiedni zarówno dla osób z obniżonym, jak i podwyższonym napięciem mięśniowym, DOMINATOR EVO Pro™ to konstrukcja wykonana z trwałych materiałów, gwarantująca długotrwałą satysfakcję z korzystania z wyrobu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdują się w niej informacje o wyrobie oraz instrukcja, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

W przypadku jakichkolwiek pytań i uwag, prosimy o kontakt:

Konsultant medyczny: tel. kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy!

1. Przeznaczenie instrukcji

⚠ UWAGA

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik oraz opiekun są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania wózka przed użytkowaniem, użytkowania wózka, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących wyrób.

2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

Przeciwwskazania:

- stan krytyczny użytkownika,
- paraliż,
- głęboka sedacja,
- niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- niestabilność hemodynamiczna,
- stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- zatorowość płucna,
- świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud,
- użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.

3. Ogólna budowa wyrobu

Dominator evo pro™



- SKŁADANY STELAŻ
- OSŁONY MECHANIZMU SKŁADANIA WÓZKA
- REGULOWANY UCHWYT DO PROWADZENIA WÓZKA
- HAMULEC RĘCZNY (ZWALNIAJĄCY I POSTOJOWY)
- REGULOWANE PELOTY GŁOWY
- OPARCIE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I KĄTA POCHYLENIA

- PAS PIERSIOWY
- REGULOWANE PELOTY PIERSIOWE
- REGULOWANE PODŁOKIETNIKI
- SIEDZISKO Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI
- PODUSZKA SIEDZISKA


- REGULOWANE PELOTY BIODROWE
- REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY
- BOCZNE OSŁONY ŁYDEK


- REGULOWANY PODNÓŻEK Z 4-PUNKTOWYMI PASKAMI STABILIZUJĄCYMI STOPY
- KOŁA POMPOWANE TYLNE Z HAMULCEM BĘBNOWYM
- KOŁA PRZEDNIE SKRĘTNE Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY KIERUNKU JAZDY
- FUNKCJA KUBEŁKOWA ORAZ STOPKA WSPOMAGAJĄCA JEJ REGULACJĘ
- KOSZ POD SIEDZISKO
- PLECAK


INFORMACJA


Odwiedź stronę internetową akces-med.com/product/dominator-evo-pro/, aby zobaczyć dostępne akcesoria.

4. Tabela rozmiarowa

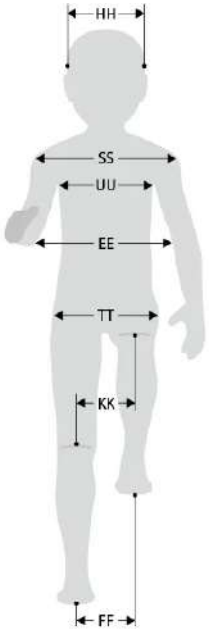

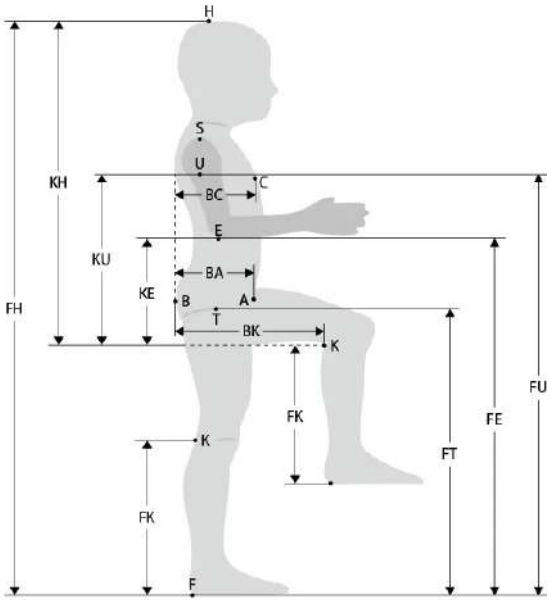

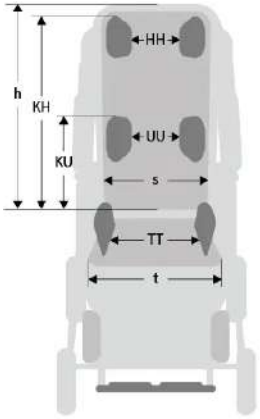

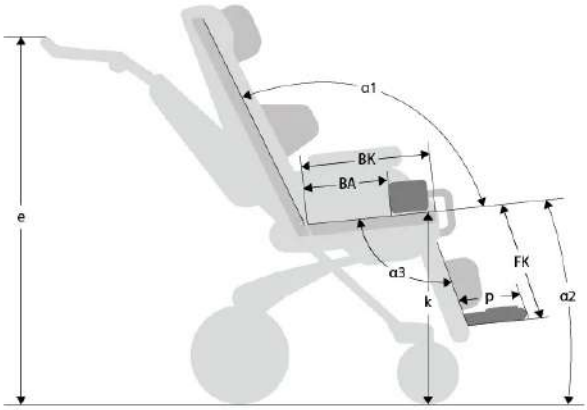

4. Tabela rozmiarowa

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
FH	orientacyjny wzrost użytkownika *	[cm]	<150	<180	<180
t	szerokość siedziska	[cm]	38	42	48
TT	rozstaw pelot biodrowych	[cm]	21 - 29	24 - 34	32 - 40
BK	głębokość siedziska	[cm]	28 - 38	36 - 48	36 - 48
BA	głębokość siedziska do klina	[cm]	8 - 25	8 - 30	8 - 30
h	wysokość oparcia	[cm]	58 - 70	72 - 84	72 - 84
KH	wysokość pelot głowy	[cm]	56 - 68	69 - 84	69 - 84
s	szerokość oparcia	[cm]	30	34	40
UU	rozstaw pelot piersiowych	[cm]	16 - 24	22 - 32	26 - 34
k	wysokość siedziska od podłoża	[cm]	52	55	55
HH	rozstaw pelot głowy	[cm]	12- 19	12 - 19	14 - 22
KU	wysokość pelot piersiowych	[cm]	20 - 42	28 - 52	28 - 52
KE	wysokość podłokietników od siedziska	[cm]	14 - 20	20 - 28	20 - 28
EE	rozstaw podłokietników	[cm]	36	40	46
FK	długość podnóżka	[cm]	33 - 40	37 - 48	37 - 48
p	długość platformy podnóżka	[cm]	23	25	25
e	wysokość rączki prowadzącej	[cm]	80 - 124	73 - 120	74 - 118
α1	kąt pochylenia siedziska	[°]	5 - 20	5 - 20	5 - 20
α2	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 130	90 - 130	90 - 130
α3	kąt pochylenia podnóżka	[°]	105 - 125	110 - 130	110 - 135
α4	kąt pochylenia platformy podnóżka	[°]	75 - 105	75 - 105	75 - 105
	max. waga użytkownika	[kg]	50	75	90

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
szerokość	[cm]	64	67	73
szerokość po złożeniu	[cm]	64	67	73
długość	[cm]	121 - 152	136 - 170	136 - 170
długość po złożeniu	[cm]	105	117	117
wysokość	[cm]	104 - 124	98 - 133	98 - 133
wysokość po złożeniu	[cm]	50	50	50
waga	[kg]	33,5	36,5	38

* Wzrost nie powinien być podstawą doboru wyrobu.
Uwaga: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu. Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: W skrajnych położeniach uchwytu do prowadzenia wózka może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta pochylenia. W takich przypadkach należy unieść uchwyt na czas regulacji oparcia.

5. Opis obsługi wyrobu

5.1 Rozkładanie wyrobu













⚠ UWAGA

Podczas rozkładania wózka należy zwrócić szczególną uwagę na mechanizm jego składania - elementy powinny całkowicie nachodzić na siebie.

Podczas rozkładania usłyszysz charakterystyczny „KLIK”.

5. Opis obsługi wyrobu

5.1 Rozkładanie wyrobu





INFORMACJA

Klin międzyudowy, po wprowadzeniu w konsolkę pod siedziskiem wózka należy dokręcić na wybranej głębokości.

INFORMACJA

Podłokietniki posiadają oznaczenia:

R podłokietnik prawy - montowany po prawej stronie użytkownika

L podłokietnik lewy - montowany po lewej stronie użytkownika







5. Opis obsługi wyrobu

5.2 Składanie wyrobu

















5. Opis obsługi wyrobu

5.2 Składanie wyrobu





5.3 Regulowany podnóżek

Regulacja wysokości podnóżka





Regulacja kąta pochylenia podnóżka





5. Opis obsługi wyrobu

5.3 Regulowany podnóżek

Regulacja kąta pochylenia płyty podnóżka



INFORMACJA

Poprzez wysunięcie śruby, regulowany jest stopień pochylenia podnóżka.

Regulacja odbywa się obustronnie.

5.4 Regulacja pelot głowy







UWAGA

Po zakończonej regulacji należy pamiętać o mocnym dokręceniu pokręteł.

5. Opis obsługi wyrobu

5.5 Regulacja pelot piersiowych z pasem











⚠ UWAGA

Po zakończonej regulacji należy pamiętać o mocnym dokręceniu pokręteł.



5. Opis obsługi wyrobu

5.6 Regulacja pelot biodrowych





UWAGA

Regulacja pelot biodrowych znajduje się pod siedziskiem wózka. Po zakończonej regulacji należy pamiętać o mocnym dokręceniu pokręteł.

5.7 Regulacja głębokości siedziska





UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że siedzisko zostało poprawnie zablokowane.

5. Opis obsługi wyrobu

5.8 Regulacja pochylenia oparcia





UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy upewnić się, że oparcie zostało poprawnie zablokowane. Blokada powinna znajdować się na tym samym poziomie po obu stronach oparcia.

5.9 Regulacja wysokości oparcia





UWAGA

Po zakończonej regulacji wysokości oparcia należy bezwzględnie dokręcić śruby.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że zostały one mocno dokręcone, a oparcie nie opada samoczynnie.

5. Opis obsługi wyrobu

5.10 Funkcja kubełkowa





INFORMACJA

Naciskając dźwignię regulacji funkcji kubełkowej należy równocześnie pociągnąć za oparcie oraz prowadzić je do momentu ustawienia żądanego kąta kubełka. Zwolnić dźwignię.



INFORMACJA

Po ustawieniu kąta kubełka należy dostosować głębokość tapicerki oparcia.

Odbezpieczając klamry należy dostosować długość pasów mocujących tapicerkę oparcia, a po zakończeniu mocno je zacisnąć.



5. Opis obsługi wyrobu

5.11 Regulacja klina międzyudowego





INFORMACJA

Klin należy wprowadzić w otwór konsolki znajdujący się pod siedziskiem wózka oraz zabezpieczyć go pokrętłem od spodu siedziska,

5.12 Regulacja podłokietników





INFORMACJA

Podłokietniki posiadają regulację głębokości - należy poluzować śruby, ustawić żądaną głębokość, dokręcić śruby.

5. Opis obsługi wyrobu

5.13 4-punktowe paski stabilizujące stopy


INFORMACJA

Paski stabilizujące stopy montuje się pod płytą podnóżka.

Każdy z pasków należy przepleść przez otwory w płycie oraz zabezpieczyć od spodu regulatorem.

Schemat przekładania pasków znajduje się poniżej.



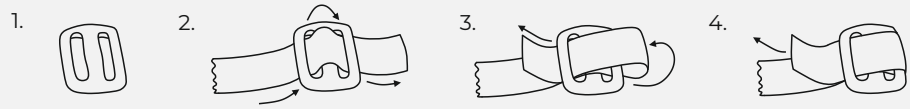

SPOSÓB I







5. Opis obsługi wyrobu

5.13 4-punktowe paski stabilizujące stopy

SPOSÓB II















5. Opis obsługi wyrobu

5.14 Hamulce zwalniające (ręczne)







INFORMACJA

1. Umiarkowany poziom siły blokady hamulca.
2. Średni poziom siły blokady hamulca.
3. Mocny poziom siły blokady hamulca.

UWAGA

Hamulce ręczne posiadają blokadę siły hamowania na trzech poziomach: umiarkowanym, średnim oraz mocnym.

Naciskanie wyłącznie manetki bez aktywowania czerwonej blokady powoduje przyhamowanie - pomocne przy zjeżdżaniu po terenie pochyłym.

Należy pamiętać, że naciśnięcie wyłącznie czarnego elementu manetki nie spowoduje zablokowania hamulca. Aby go zablokować, należy aktywować czerwoną blokadę, wprowadzając ją w miejsce wybranego stopnia siły hamowania.

Zwolnienie hamulca następuje poprzez jednoczesne naciśnięcie manetki i zwolnienie czerwonej blokady.

Poprawne przyhamowanie lub całkowite zahamowanie wózka odbywa się wyłącznie przy użyciu obu manetek.

6. Użytkowanie wyrobu

6.1 Przygotowanie użytkownika

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, nie krępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące stawy skokowe,
- użytkownik nie był umieszczany w urządzeniu bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.

⚠ UWAGA

Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia celem przeciwdziałania otarciom ciała.

Decyzje o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta.

6.2 Wsiadanie i zsiadanie z wyrobu

Wkładanie użytkownika do wyrobu:

- ustawić wyrób na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wyrobu,
- upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należycie zamocowanie i stabilne,
- zablokować hamulce,
- dopasować wyrób do wymiarów użytkownika,
- odpiąć pas piersiowy lub inne wyposażenie stabilizujące, aby umożliwić swobodne włożenie użytkownika,
- złożyć podnóżek celem uniknięcia stawania na płytę podnóżka,
- umieścić użytkownika w wyrobie (Rys. 1),
- zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika,


6. Użytkowanie wyrobu

6.2 Wsiadanie i zsiadanie z wyrobu

- umieścić elementy podtrzymujące oraz pozycjonujące użytkownika,
- zamontować pozostałe wyposażenie oraz rozłożyć podnóżek.

Wyjmowanie użytkownika z wyrobu:

- ustawić wyrób na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wyrobu,
- zablokować hamulce,
- odpiąć pas piersiowy lub inne elementy stabilizujące, aby umożliwić swobodne wyjęcie użytkownika,
- złożyć podnóżek celem uniknięcia stawania na płytę podnóżka,
- wyciągnąć użytkownika z wyrobu (Rys. 1).

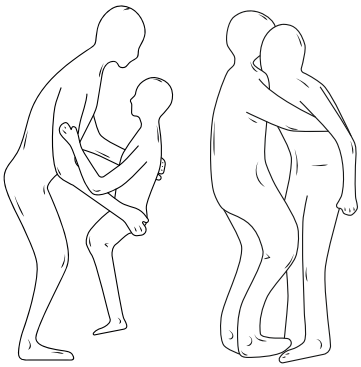

Rys. 1 Sposoby podtrzymywania użytkownika

⚠ UWAGA

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy upewnić się, że wszystkie pasy, kamizelki i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone.

Zabrania się stawania na płytę podnóżka podczas wsiadania użytkownika do wyrobu. W skrajnych sytuacjach może to doprowadzić do uszkodzenia podnóżka lub przewrócenia się i uszkodzenia wyrobu, co skutkować może uszkodzeniem ciała użytkownika.

Wyrób będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję jedynie wtedy, gdy będzie dostosowany do wymiarów ciała użytkownika.

Główną zasadą przy dopasowywaniu wyrobu jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika - może to powodować jego dyskomfort.

W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.

Nieumiejętne korzystanie z wyrobu może prowadzić do utrwalenia nieprawidłowych wzorców postawy.

6. Użytkowanie wyrobu

6.3 Przyjęcie pozycji siedzącej

Pierwsze przyjęcie pozycji siedzącej przez użytkownika następuje zwykle w warunkach ośrodków rehabilitacji, neurologii, neurochirurgii lub ortopedii. Istotne jest prawidłowe dopasowanie poszczególnych elementów wyposażenia wyrobu do staniu użytkownika z uwzględnieniem istniejących przykurczów i deformacji.

Sadzanie w warunkach domowych wykonuje wykwalifikowany personel po uprzednim przeszkoleniu (fizjoterapeuta, pielęgniarka środowiskowa, osoby przeszkolone z rodziny) po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi wyrobu.

⚠ UWAGA

Nieprawidłowa konfiguracja wyrobu może doprowadzić do skutków ubocznych takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie, wyjąć użytkownika z wyrobu i położyć. Jeżeli niepożądane objawy utrzymują się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy ustąpiły, należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Decyzję o zastosowaniu wyrobu podejmuje lekarz prowadzący.

Dopasowanie wyrobu do użytkownika powinno zostać przeprowadzone wyłącznie przez osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie obsługi wyrobu i zapoznały się z instrukcją obsługi.

6.4 Pozycja podczas jazdy wózkiem specjalnym inwalidzkim

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika, należy ułożyć miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, aby równomiernie podpierać kręgosłup. Uda powinny mieć podparcie na całej długości, co wymaga dopasowania głębokości siedziska dostępnymi regulacjami, a jeśli taka nie występuje, dostępnymi akcesoriami.

Stopy powinny być oparte na płycie podnóżka w celu zapobiegania zsuwaniu się, optymalnego napięcia mięśni i przeniesienia ciężaru ciała.

Ze względu na dostępne regulacje wyrobu, zabronione jest ustawianie pozycji, w której głowa użytkownika znajduje sie poniżej linii miednicy. Pozycja ta stwarza ryzyko zachłyśnięcia się lub zakrztuszenia.

6. Użytkowanie wyrobu

6.5 Jazda wózkiem specjalnym inwalidzkim

Podczas użytkowania wózka, zawsze trzymaj go za uchwyt do prowadzenia, aby zapobiec jego bezwładnemu toczeniu.

Rozpoczynając jazdę zwolnij hamulec centralny i trzymając uchwyt do prowadzenia, kieruj wózek w bezpiecznym kierunku.


Poruszanie się po powierzchniach pochyłych

Podczas pokonywania wzniesień, zawsze ustawiaj wózek przodem do kierunku jazdy. Ogranicz prędkość i poruszaj się powoli. Opiekun musi mieć wystarczającą siłę, aby kontrolować stabilność wózka.

Należy pamiętać, że środek ciężkości wózka zmienia się na nierównościach. Upewnij się, że podjazd jest odpowiedni, koła wystarczająco wysokie, aby rama nie stykała się z podjazdem. Warto zapewnić pomoc drugiej osoby.

Pokonywanie progów i krawężników

Aby pokonać małe przeszkody, należy nacisnąć uchwyt do prowadzenia w dół, aby unieść przednie koła wózka, a następnie najechać nimi ponad przeszkodę. Pociągnąć uchwyt do góry i unieść tylne koła tak, aby najechać nimi na przeszkodę.

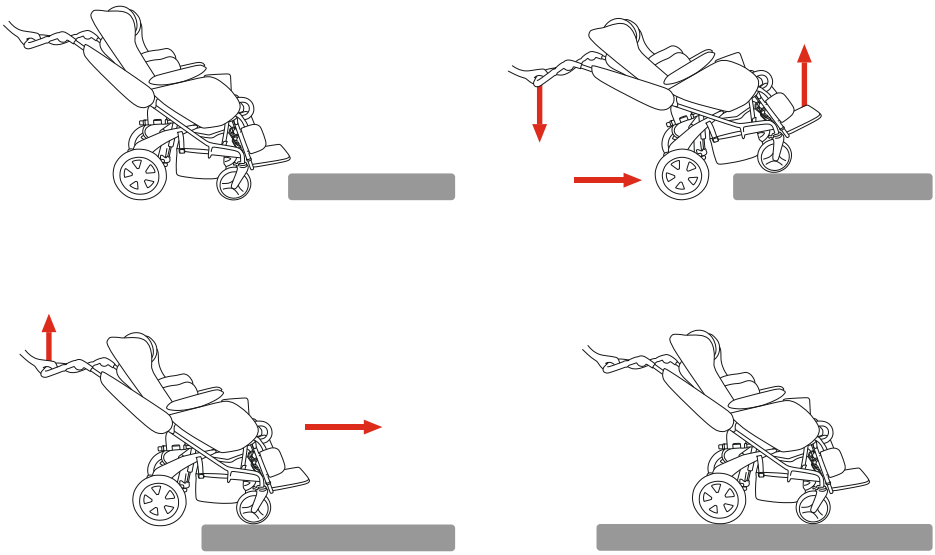

Rys. 2 Schemat pokonywania progów i krawężników

6. Użytkowanie wyrobu

6.6 Instrukcja użytkowania kamizelek

⚠ UWAGA

Kamizelka zapewnia wsparcie postawy u osób siedzących na wózkach specjalnych inwalidzkich, fotelikach lub innych siedziskach rehabilitacyjnych. Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala utrzymać prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji, kamizelka nie ogranicza możliwości swobodnych ruchów kończyn górnych.

Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki.

1. Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi użytkownika, utrudniając mu oddychanie - należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika.
2. Użytkownik zsuwa się z siedziska, górny brzeg kamizelki obejmuje jego szyję i blokuje jego tchawicę utrudniając oddychanie - z kamizelką ZAWSZE należy stosować wyposażenie dodatkowe takie jak np. pas biodrowy, aby zapobiec zsuwaniu się z wyrobu.
3. Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę będą uciskać szyję użytkownika utrudniając oddychanie w przypadku, gdy użytkownik został w niewłaściwy sposób zabezpieczony w wyrobie - należy wówczas dodatkowo ustabilizować tułów użytkownika przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować tułowia, należy wymienić je na urządzenie posiadające taką funkcję.
4. Kamizelka jest zbyt mocno dociągnięta do oparcia, w wyniku czego użytkownik nie może swobodnie oddychać - w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę, aby pomiędzy kamizelką, a ciałem użytkownika opiekun mógł swobodnie wsunąć dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu użytkownika, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej np. kamizelki Flex-Point®, która nie utrudnia użytkownikowi oddychania.

Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

1. Upewnij się, że użytkownik siedzi w najlepszej możliwej pozycji:
    - na środku siedziska,
    - głęboko w siedzisku, w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa przylegał do oparcia.
2. Zabezpiecz miednicę użytkownika.

6. Użytkowanie wyrobu

6.6 Instrukcja użytkowania kamizelek

3. Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla użytkowników ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają ruchy opadania tułowia na bok, które mogą prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję.
4. Zamontuj i dopasuj kamizelkę:
    - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika, dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne,
    - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
    - zapnij pasy naramienne kamizelki,
    - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku.
5. Sprawdź pozycję użytkownika:
    - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi użytkownika,
    - upewnij się, że możesz wsunąć dłoń między ciało użytkownika, a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki, należy stosować się do poniższych zasad.

1. Pozycja kamizelki MUSI bezwzględnie zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu użytkownika na siedzisku.
2. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie użytkownika przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka MUSI być używana przez cały czas z zabezpieczeniem miednicy użytkownika (np. za pomocą pasa biodrowego). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami, takimi jak pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pozycja kubełkowa i odchylane oparcie.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby całe stopy użytkownika miały stabilne podparcie. Jeżeli wyrób nie jest wyposażony w podparcie dla stóp, stopy użytkownika muszą pewnie opierać się o podłoże.
4. Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubełkowej może mieć wpływ na skuteczność pasów i podpór!
5. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeżeli użytkownik ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogłyby prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję użytkownika.
6. Montażu i dopasowania kamizelki do użytkownika może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
7. Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub zmiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!

6. Użytkowanie wyrobu

6.6 Instrukcja użytkowania kamizelek

8. Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika!
9. Nie należy zostawiać użytkownika w wyrobie bez opieki!
10. Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
11. Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad użytkownikiem są zaznajomione z zasadami jej bezpiecznego stosowania.

Kamizelka działa skutecznie, gdy utrzymana jest w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdzić, czy:

- paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte - jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe,
- paski kamizelki nie są zaczepione o koła wyrobu,
- klamry nie są uszkodzone - jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe,
- zapięcia na taśmy sczepne mocno się trzymają - jeśli nie, należy usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia lub zlecić wymianę na nowe,
- nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do użytkownika, ze względu na jego wzrost, przyrost lub utratę wagi,
- szelki kamizelki są odpowiednio wyregulowane, czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne,
- kamizelka jest czysta - należy ją regularnie czyścić ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.

7. Zasady bezpieczeństwa

⚠ UWAGA

Wózek specjalny inwalidzki DOMINATOR EVO Pro™ należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie wyrobu należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty o prawidłowym jego doborze. Przed użytkowaniem wyrobu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem wyrobu należy:
   - sprawdzić wyrób pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji wyrobu,
   - upewnić się, czy wszystkie części są poprawnie zamontowane, a wyrób nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji,
   - sprawdzić, czy nie zostały poluzowane śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.,
   - sprawdzić stan tapicerki, czy nie posiada śladów uszkodzenia,
   - sprawdzić sprawność hamulców,
   - sprawdzić prawidłowość działania sprzączek,
   - zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm,
   - dopasować wyrób do wymiarów i potrzeb użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie regulowanych elementów wyrobu,
   - upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień wyrobu są stabilne i zablokowane,
   - zabezpieczyć użytkownika dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wyrobu. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m. in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia,
   - w przypadku występowania u użytkownika nadmiernego napięcia w obrębie przywodzicieli kończyn dolnych zalecane jest stosowanie wybranych pasów odwodzących uda w celu zapobiegania powstawaniu odciśnięć i/lub odleżyn w okolicy stawów kolanowych od strony przyśrodkowej.
2. Zabrania się użytkowania wyrobu w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania wyrobu, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiejkolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w wyrobie bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu opiekuna, który zapoznał się z instrukcją obsługi.

7. Zasady bezpieczeństwa

6. Zabrania się pozostawiania wyrobu z użytkownikiem bez opieki na terenie pochyłym lub nierównym.
7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wyrobem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.
8. Wsiadanie i wysiadanie użytkownika z wyrobu zawsze powinno odbywać się przy aktywnych hamulcach.
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wsiadania i wysiadania z wyrobu użytkownik nie stawał na podnóżku.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wyrobu, kończyny użytkownika nie dostały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Wyrób należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy wysokiej temperatury. Wyrób nie powinien być również przechowywany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza, piwnicach, na zewnątrz - balkonach lub tarasach. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność i wyrób przechowywany będzie dłużej poza pomieszczeniami o niskiej wilgotności powietrza, należy go zabezpieczyć pokrowcem nieprzemakalnym.
12. Podczas transportu wyrobu bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.
13. Przed użyciem wyrobu należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe.

⚠ UWAGA

Nieprawidłowa konfiguracja wyrobu może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

Zabrania się przewożenia użytkownika w wyrobie w środkach transportu (np. pociągu, samochodzie, autobusie).

Wyrób zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

7. Zasady bezpieczeństwa

⚠ UWAGA

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej dostępnej w instrukcji obsługi oraz na stronie internetowej.





8. Warunki gwarancji

1. Akces-MED Sp. z o.o. sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
2. Wyrób jest objęty 24 miesięczną gwarancją, licząc od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
3. Uszkodzenia powstałe po okresie 24 miesięcy mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że wyrób jest przedmiotem refundacji. W takim przypadku użytkownik może wystąpić do NFZ o refundację na naprawę wyrobu w ramach serwisu pogwarancyjnego.
4. Producent określa czas użytkowania wyrobu na 48 miesięcy. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
5. W razie uszkodzenia wyrobu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy:Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).

9. Konserwacja i czyszczenie

Wózek DOMINATOR EVO Pro™ będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wyrobu są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów wyrobu.

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym.
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy przetrzeć czystą, wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.
4. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
5. Tapicerki nie należy zamaczać.
6. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tapicerki przed kolejnym czyszczeniem.
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.
9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wyrobu podczas korzystania z niego przez użytkownika.
10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.
11. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych, plastikowych, drewnianych oraz tapicerskich elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczonego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnię płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.



9. Konserwacja i czyszczenie

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić koła z wszelkich zanieczyszczeń,
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo dokręcone, niezniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koła,
- sprawdzić, czy konstrukcja wyrobu nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji,
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone,
- sprawdzić, czy pasy nie są postrzępione, a sprzączki, rzepy i klamry działają prawidłowo.

⚠ UWAGA

Przed ponownym użyciem wyrobu, tapicerka zawsze musi być sucha!

Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących wytwórca Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wyrobu spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).

9. Konserwacja i czyszczenie

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

STAN OGÓLNY WYROBU

Sprawdzić:

- cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych,
- czy wyrób jest kompletny,
- czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.

KOŁA I HAMULCE

Sprawdzić:

- unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone (jeśli dotyczy),
- czy hamulce blokują obracające się koła (jeśli dotyczy),
- czy koła nie są zabrudzone. Oczyścić koła z wszelkich zanieczyszczeń.

MOCOWANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, w szczególności sprawdzić:

- poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy),
- poprawność montażu kół (jeśli dotyczy),
- poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy),
- czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się,
- poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzyudowy, podłokietniki, podnóżek.

ELEMENTY TAPICERSKIE

Sprawdzić:

- elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji,
- czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo,
- czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

RAZ NA TYDZIEŃ

CZYSZCZENIE WYROBU

Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki pokarmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.

Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.

9. Konserwacja i czyszczenie

RAZ W MIESIĄCU

OSIE KÓŁ, SZYBKOZŁĄCZA (JEŚLI DOTYCZY)

Sprawdzić:

- czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy oś, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwująco smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.

W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych.

POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI WYROBU (SPAWANE, GWINTOWANE, LUTOWANE)

Sprawdzić:

- stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).

OPONY, DĘTKI (JEŚLI DOTYCZY)

Sprawdzić:

- stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).

W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować do właściwego poziomu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

RAZ NA 6 MIESIĘCY

RUCHOME ELEMENTY KONSTRUKCJI

Sprawdzić:

- ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.

OZNAKOWANIE

Sprawdzić:

- oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

PO ZAKOŃCZENIU CZASU UŻYTKOWANIA WYROBU

SZCZEGÓŁOWY PRZEGLĄD WYROBU

Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu.

Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu.

W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

10. Oznakowanie

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE

Numer seryjny

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Uwaga!

Wytwórca

Data produkcji

Produkt nie zawiera lateksu

Przechowywać w suchym miejscu

Chronić przed promieniami słonecznymi

Ograniczenie temperatury przechowywania

Wyrób medyczny

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

Suszyć pionowo

Nie chlorować

Nie prasować

Nie czyścić chemicznie

Nie wybielać

Ostrożnie, delikatna zawartość

Zakaz zjeżdżania po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez

Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu

Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających

Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami

Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu

Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie

Na tabliczce znamionowej wyrobu znajdują się podstawowe informacje o produkcie takie jak nazwa, maksymalne obciążenie, dane producenta, data produkcji oraz oznakowanie zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych.

Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955 B,
36-002 Jasionka, POLSKA
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619

Autoryzowany Przedstawiciel

Data wydania: 21.02.2024 | Data aktualizacji: 16.12.2025
© Sławomir Wroński 2025