

ZEBRA INVENTO™

Fotelik ortopedyczny



MD Wyrób medyczny klasy I

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Opis produktu

Fotelik ortopedyczny **ZEBRA invento™** przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze znacznymi deficytami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej. Doskonały zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje umiarkowana spastyczność.

Fotelik ten może być również bardzo przydatny w schorzeniach ortopedycznych lub po zabiegach chirurgicznych u dzieci wymagających długotrwałego odciążenia jednej lub obu kończyn dolnych. Sprężyna pneumatyczna pozwala na płynną zmianę kąta nachylenia siedziska (funkcja kubelkowa) w zakresie od (+25°) do (-20°). Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w foteliku rehabilitacyjnym **ZEBRA invento™** bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu mały użytkownik ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w pozycji siedzącej. Bogate wyposażenie i szerokie zakresy regulacji pozwalają właściwie dopasować fotelik do potrzeb i dysfunkcji. Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały w innowacyjny system **Chwyc i pociągnij™**. Umożliwia on błyskawiczne i dokładne zabezpieczenie dziecka w foteliku.

W trosce o małego użytkownika produkt został wykonany z ekologicznych i bezpiecznych materiałów.

Wskazania do stosowania

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.



Szczególne zalety



Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.



Cicha praca

Zastosowanie w wyrobie sprężyny gazowej zapewnia cichą pracę urządzenia.



Tapicerka oddychająca

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.



Sprawną pionizacja

Zastosowanie w wyrobie mechanizmu czworoboku przegubowego, poprawia płynność regulacji funkcji kubelkowej.



Funkcja kubelkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.



Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Wspomaganie pneumatyczne

Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta pochylenia urządzenia.



Stopki z regulacją 3D

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korektę ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.



2 w 1

Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu. Funkcję statyczną oraz dynamiczną.



Gwarancja 24 miesiące


Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Kolorystyka


Tapicerka oddychająca **ATMO™**




GRASS
Rozmiar 1

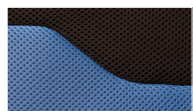

SEA
Rozmiar 2

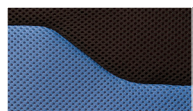

SEA
Rozmiar 3

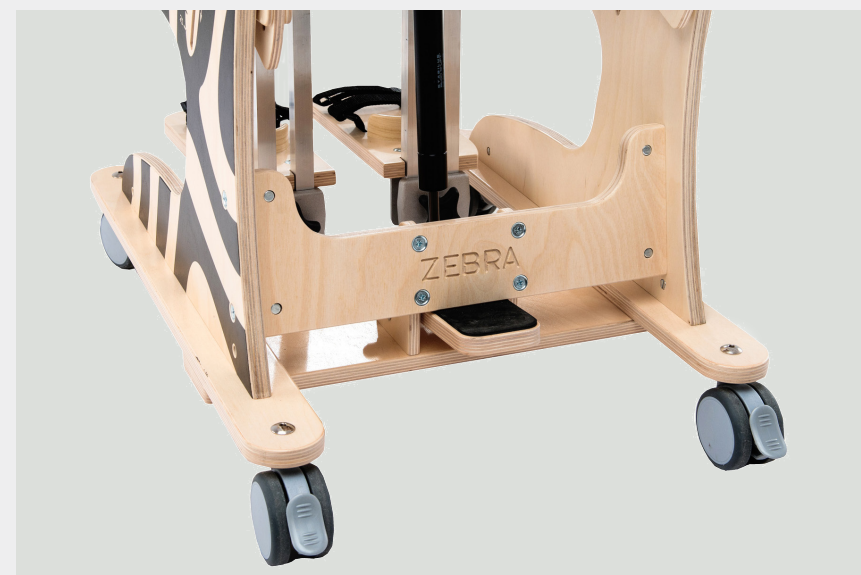

Regulacja funkcji kubelkowej

Zastosowanie czworoboku przegubowego wspartego pracą sprężyny gazowej znacznie poprawia płynność regulacji funkcji kubelkowej.



Regulacje

Podziałka umieszczona na boku stelaża, pomocna przy ustawianiu kąta pochylenia siedziska w funkcji kubekowej.



Design

Nowoczesny design oraz najwyższa jakość wykonania.

Wypośażenie standardowe

Zagłówek HexagonPro™

Kamizelka 4-punktowa

Pas biodrowy

Sprężyna gazowa

Stelaż z kołami jezdnyymi wyposażonymi
w hamulce

Regulowane oparcie z poduszką

Peloty piersiowe

Stolik

Regulowany klin międzyudowy


Regulowane siedzisko z poduszką

Regulowane podnóżki ze stopkami
z paskami stabilizującymi stopy



Istotne pomiary

Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć pełną tabelę.

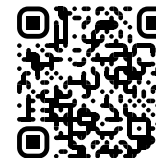

Rozmiary	Szerokość siedziska	Głębokość siedziska	Wysokość oparcia z zagłówkiem	Szerokość oparcia	Kąt pochylenia oparcia	Kąt pochylenia siedziska	Kąt pochylenia podnóżków
Rozmiar 1	34 cm	16 - 25 cm	37 - 52 cm	14 - 23 cm	90 - 180°	-20 - +25°	90 - 180°
Rozmiar 2	37 cm	21 - 35 cm	42 - 57 cm	18 - 27 cm	90 - 180°	-20 - +25°	90 - 180°
Rozmiar 3	50 cm	24 - 42 cm	49 - 64 cm	22 - 38 cm	90 - 180°	-20 - +25°	90 - 180°



Rozmiar	Orientacyjny wzrost użytkownika*	Max. Waga użytkownika
Rozmiar 1	70 - 100 cm	25 kg
Rozmiar 2	80 - 130 cm	45 kg
Rozmiar 3	90 - 150 cm	60 kg

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiar	Szerokość	Długość	Wysokość	Waga
Rozmiar 1	50 cm	82 cm	76 cm	14 kg
Rozmiar 2	56 cm	100 cm	95 cm	20 kg
Rozmiar 3	73 cm	105 cm	140 cm	34 kg

Akcesoria




Pas tułowia

Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie w wielu naszych produktach. Zabezpiecza przed wypadnięciem. Anatomiczny kształt i zapięcie velcro pozwala na komfortowe dopasowanie.



Poduszki podparcia łydek

Montowane do podnóżków. Zapewniają dodatkowe podparcie podudzi. Niezależna regulacja wysokości pozwala na ich dopasowanie także u osób z asymetrią długości kończyn dolnych.

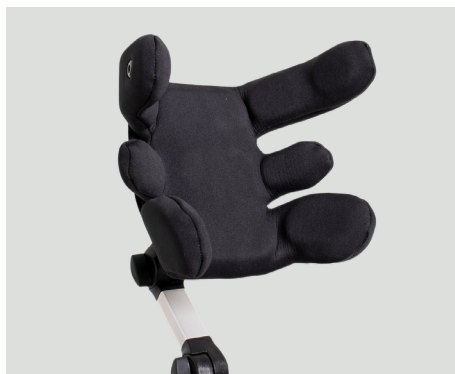

Zagłówek VisoPro™

Poszczególne części zagłówka pomagają zabezpieczyć głowę przed niechcianą rotacją oraz opadaniem na boki. Górna część podpira głowę bocznie, środkowa kontroluje jej ustawienie w okolicach uszu, natomiast dolna wspiera okolicę podstawy czaszki.



Stabilizator kolan

Montowany w miejsce klina. Stabilizuje i separuje kończyny dolne.



Niezależnie regulowane peloty boczne

Pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne dopasowanie produktu. Peloty można ustawiać na różnych wysokościach.



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć wszystkie akcesoria.